


# VITAMMY®

## grow

waga dla noworodków, niemowląt i starszych dzieci

SBS-30311

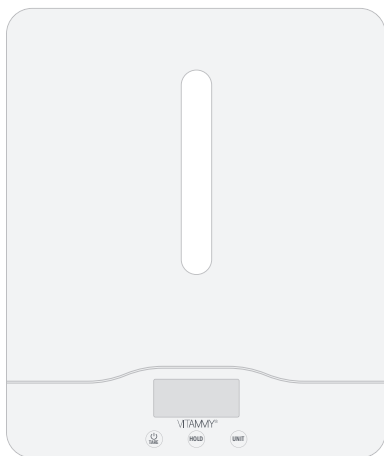

### INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA


⚠ Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.

## WPROWADZENIE

Bardzo dziękujemy za wybranie naszej cyfrowej wagi dla niemowląt. Przeczytaj instrukcję obsługi i ostrzeżenia przed pierwszym użyciem urządzenia. Zwróć szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadków i / lub uszkodzenia produktu podczas korzystania z niego. Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość.

Ta elektroniczna waga to domowe urządzenie przydatne dla wszystkich członków rodziny. Nadaje się do ważenia noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby produkt był najwyższej jakości, komfortowy dla dziecka, łatwy w użyciu i bezpieczny podczas ważenia.

## OPIS URZĄDZENIA

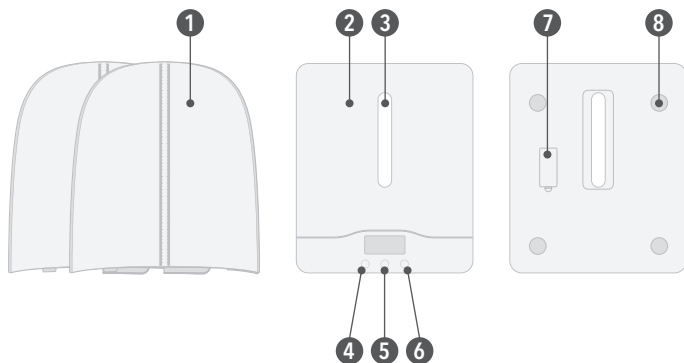

1. Szalka dla noworodków i niemowląt
2. Waga
3. Szczelina mocująca dla szalki
4. Przycisk **Włącz / Wylącz / Tara**
5. Przycisk **HOLD**
6. Przycisk zmiany jednostek **UNIT**
7. Osłona baterii
8. Nóżki wagi


## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### INSTALOWANIE BATERII


- ⚠ Przed pierwszym użyciem należy zainstalować baterie.
1. Otwórz osłonę baterii i wyjmij izolator z komory baterii.
  2. Zainstaluj 2 baterie typu AAA (1,5V) zgodnie z oznaczoną polaryzacją.
  3. Zamknij osłonę baterii.

### SZALKKA


- ⚠ Do ważenia noworodka lub niemowlęcia użyj szalki.
1. Na płaskiej powierzchni połóż obie części szalki, wystającymi elementami do góry, a następnie zsuń je ze sobą, tworząc jedną szalkę.

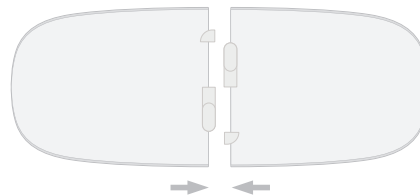

2. Na tak przygotowaną szalkę nałóż wagę wykorzystując jej szczelinę.

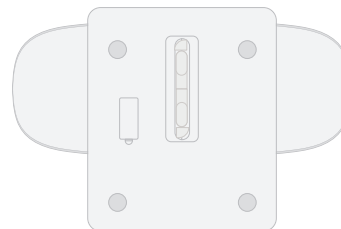

3. Zabezpiecz szalkę przed wypadnięciem przekręcając dwa elementy zabezpieczające na spodzie wagi.

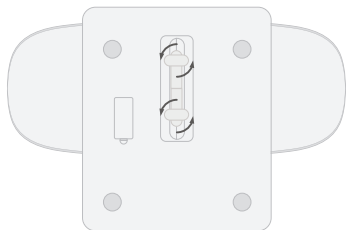

4. Kiedy nie potrzebujesz szalki, zwolnij zabezpieczenie na spodzie wagi i zdejmij szalkę. Schowaj obie części w suchym miejscu.

#### WAŻENIE NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT

- Postaw wagę z zainstalowaną szalką na twardej, płaskiej i poziomej powierzchni.
- ▲ Nie stawiaj wagi na miękkich powierzchniach takich jak dywan, czy wykładzina, ponieważ może to wpłynąć na wynik pomiaru.
- Włącz wagę przyciskiem **Włącz / Wyłącz / Tara**. Na krótko pojawią się wszystkie elementy wyświetlacza.
- Kiedy na ekranie pojawi się zero i jednostka wagi można przystąpić do ważenia.
- Jeśli chcesz zmienić jednostkę wagi, (kg / lb / oz) naciśnij przycisk **UNIT**.
- Połóż dziecko na wadze. Wynik pojawi się na ekranie. Jeśli nie chcesz kłaść dziecka bezpośrednio na wadze, najpierw połóż na wadze ręcznik, naciśnij przycisk **Włącz / Wyłącz / Tara**, by wyzerować wagę, a następnie połóż na wadze dziecko.
- Kiedy wynik ustabilizuje się na ekranie, możesz naciśnąć przycisk **HOLD**, by zatrzymać wynik na ekranie, bez względu na ruchy dziecka. Aby uwolnić wynik naciśnij przycisk **HOLD** ponownie.
- Wyłącz wagę naciskając przycisk **Włącz / Wyłącz / Tara** lub poczekaj aż waga sama się wyłączy po około 2 minutach.
- ▲ Jeśli chcesz wykonać kolejny pomiar, po zdjęciu dziecka z wagi, wyzeruj wagę przed kolejnym ważeniem naciskając przycisk **Włącz / Wyłącz / Tara**.

#### WAŻENIE WIĘKSZYCH DZIECI

- Postaw wagę bez szalki na twardej, płaskiej i poziomej powierzchni.
- ▲ Nie stawiaj wagi na miękkich powierzchniach takich jak dywan, czy wykładzina, ponieważ może to wpłynąć na wynik pomiaru.
- Włącz wagę przyciskiem **Włącz / Wyłącz / Tara**. Na krótko pojawią się wszystkie elementy wyświetlacza.
- Kiedy na ekranie pojawi się zero i jednostka wagi można przystąpić do ważenia.
- Jeśli chcesz zmienić jednostkę wagi, (kg / lb / oz) naciśnij przycisk **UNIT**.
- Wystarczy stanąć na wadze i odczytać wynik na ekranie.
- Wyłącz wagę naciskając przycisk **Włącz / Wyłącz / Tara** lub poczekaj aż waga sama się wyłączy po około 2 minutach.

#### TAROWANIE

Wagę VITAMMY GROW można ważyć kolejno dzieci. Przed wykonaniem kolejnego pomiaru, należy zdjąć dziecko z wagi, nacisnąć przycisk **Włącz / Wyłącz / Tara**, co wytaruje wagę, a następnie położyć na wadze kolejne dziecko.

#### WSKAŹNIK PRZEKROCZENIA LIMITU WAGI

Jeśli ciężar dziecka przekracza maksimum dla tej wagi (100 kg), na ekranie pojawi się symbol „Err”.



#### WSKAŹNIK NISKIEGO STANU BATERII

Waga zasignalizuje niski stan baterii poprzez wyświetlenie na ekranie symbolu „Lo”.



#### OSTRZEŻENIA

- ▲ W trakcie użytkowania wagę należy umieścić na płaskiej, suchej, stabilnej i twardej powierzchni.
- ▲ Używaj tego urządzenia w domu, zgodnie z jego przeznaczeniem.
- ▲ Nie przeciążaj wagi, maksymalnie 100 kg.
- ▲ Unikaj potrząsania lub uderzania wagi.
- ▲ Nie zanurzaj w wodzie.
- ▲ Podczas przechowywania nie kładź niczego na wadze.

- △ Optymalna temperatura do obsługi i przechowywania wagi wynosi od 5 do 40 °C.
- △ Do czyszczenia nie używać agresywnych detergentów ani środków ściernych.

## SPECYFIKACJA

- △ Wszelkie modyfikacje urządzenia są niedozwolone

<b>MODEL</b>	SBS-30311
<b>MATERIAŁ OBUDOWY</b>	ABS
<b>TYP WYŚWIETLACZA</b>	LCD 55×22 mm
<b>WYMIARY</b>	605×320×70 mm
<b>WAGA</b>	1400 g
<b>ZAWARTOŚĆ ZESTAWU</b>	Waga, instrukcja, 2 baterie typu AAA 1,5 V
<b>TEMPERATURA DZIAŁANIA, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU</b>	5–40°C
<b>CZUJNIKI</b>	4 precyzyjne czujniki tensometryczne
<b>MINIMALNE OBCIĄŻENIE</b>	100 g
<b>MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE</b>	100 kg
<b>DOKŁADNOŚĆ</b>	d=10 g
<b>ZASILANIE</b>	2 baterie typu AAA 1,5 V

## GWARANCJA

**URZĄDZENIE:** VITAMMY grow (model SBS-30311)

**GWARANT:** Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j.  
ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź

**WSPARCIE TECHNICZNE:** INFOLINIA – TEL. 887 11 00 66 E-MAIL: POMOC@NOVAMED.PL

**GWARANCJA:** Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie VITAMMY, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie.

W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 14 dni.

**TYP GWARANCJI:** Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie naprawiony oraz bezpłatnie dostarczony z owrotem do Nabywcy.

**OKRES GWARANCJI:** 24 miesięcy na urządzenie. Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania: baterie

**BIEG OKRESU GWARANCJI:** Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.

**OBZAR OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI:** Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

**POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA USTERKI:** Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności

uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.

**WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI:** W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.

**OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA GWARANCJI:**

- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.
- Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek:
  - niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania
  - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
  - ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych
  - przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, niewłaściwego zasilania, itp.)
- Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.
- Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.

Pieczęć i podpis sprzedawcy  
klienta

Data

Podpis

**UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ  
UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ**



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewni, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

Produkt posiada certyfikat CE



**INFORMACJE KONTAKTOWE****PRODUCENT:****AEMAXX CO.,LTD**

4F, Building A, Donghu Industrial Park, No61, Dongpu Er Road, Tianhe District, Guangzhou, People's Republic of China

**DYSTRYBUTOR:****NOVAMEDPL****Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j.**

ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Poland

Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

Wyprodukowano w Chinach / Made in China

Wersja instrukcji: 01.04 / 13.05.2021