

RENPHO

MODEL: RF-ALM071-GY

KOMPRESYJNY MASAZER NÓG



SPIS TREŚCI

1. Ważne wskazówki bezpieczeństwa	01
2. Informacje o kompresyjnym masażerze nóg	01
Zawartość pudełka	
Wprowadzenie	
3. Użytkowanie kompresyjnego masażera nóg	02
Ważne wskazówki przed użyciem	
Instrukcja użytkowania	
4. Bezpieczeństwo i konserwacja	06
5. Rozwiązywanie problemów	07
6. Specyfikacja techniczna	09
7. Gwarancja	09
8. Obsługa klienta	09

Dziękujemy za zakup kompresyjnego masażera nóg RENPHO. Ten masażer jest przeznaczony do masażu stóp i łydek. Pomaga złagodzić ból mięśni i zmęczenie. Należy używać go zachowując środki ostrożności. Aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć jakichkolwiek szkód materialnych, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i używać zgodnie ze wskazówkami. Nieprzestrzeganie zaleceń może spowodować poważne obrażenia lub śmierć i/lub poważne szkody majątkowe.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA


1. Jeśli którykolwiek z poniższych punktów dotyczy Ciebie, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem:
Kobieta w ciąży, dzieci, lub osoby starsze
 - Osoby, które cierpią na infekcje skórne lub mają zaczerwienienia i/lub oparzenia skóry
 - Osoby stosujące rozrusznik serca lub podobne wszczepialne urządzenie medyczne
 - Pacjenci z chorobami serca lub nowotworami złośliwymi
 - Osoby, które są objęte leczeniem lub odczuwają dyskomfort
 - Osoby cierpiące na osteoporozę
 - Osoby z wysokim ciśnieniem krwi lub nieprawidłowym ciśnieniem krwi
2. Ten produkt nie powinien być używany do celów medycznych. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego i nieprofesjonalnego.

INFORMACJE O KOMPRESYJNYM MASAŻERZE

1. Zawartość pudełka

- 1 x Nogawki na łydki i stopy
- 1 x Kontroler ręczny
- 1 x Zasilacz
- 1 x Instrukcja obsługi

2. Wprowadzenie

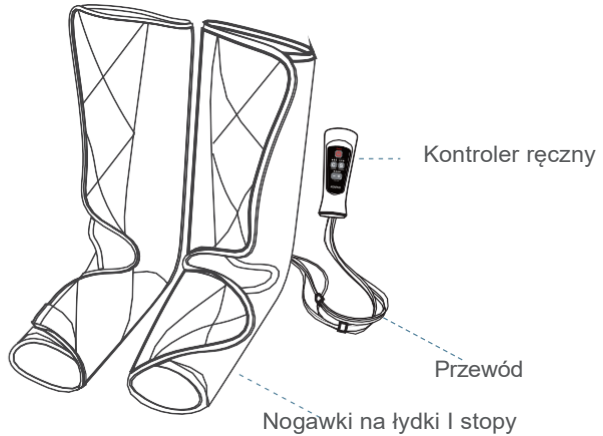


UŻYTKOWANIE KOMPRESYJNEGO MASAŻERA NÓG

1. Ważne wskazówki przed użyciem

1.1 Podczas zakładania nogawek, upewnij się, że zakładasz odpowiednie nogawki dla lewej i prawej nogi. Przewód posiada okrągłe, kolorowe oznaczenia "R" i "L" aby to ułatwić. Proszę podłączyć przewód zgodnie z poniższym obrazem:

"L" dla Lewej stopy i łydki


"R" dla Prawej stopy i łydki

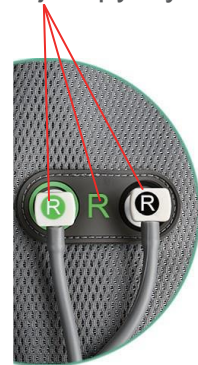

- 1.2 Upewnij się, że wszystkie przewody zostały dokładnie zamocowane i dopasowane kolorystycznie.
- 1.3 Jeżeli jest ci za ciasno lub odczuwasz dyskomfort, oto kilka rozwiązań:
- 01- Wybierz najniższą intensywność
 - 02- Poluzuj rzepy w odpowiednim miejscu
 - 03- Naciśnij przycisk On/Off aby wyłączyć
 - 04- Zaleca się pozostawienie zapasu na ok. 4 palce lub wybranie najniższej intensywności jeżeli jest ci za ciasno. Proszę zapoznać się z poniższym zdjęciem.




- 1.4 Długość przewodu powietrznego może być regulowana w zależności od potrzeb.

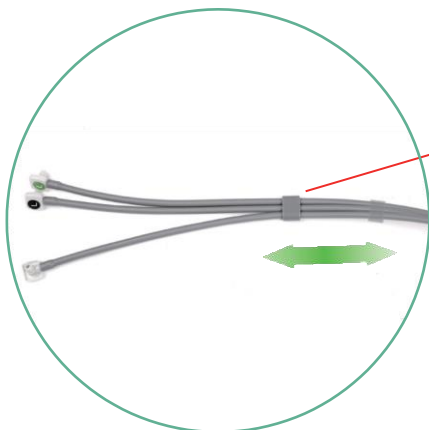


Istnieje możliwość przesuwania plastikowego pierścienia.

- 1.5 Wzrost temperatury kontrolera ręcznego jest normalny.

2. Instrukcja użytkowania

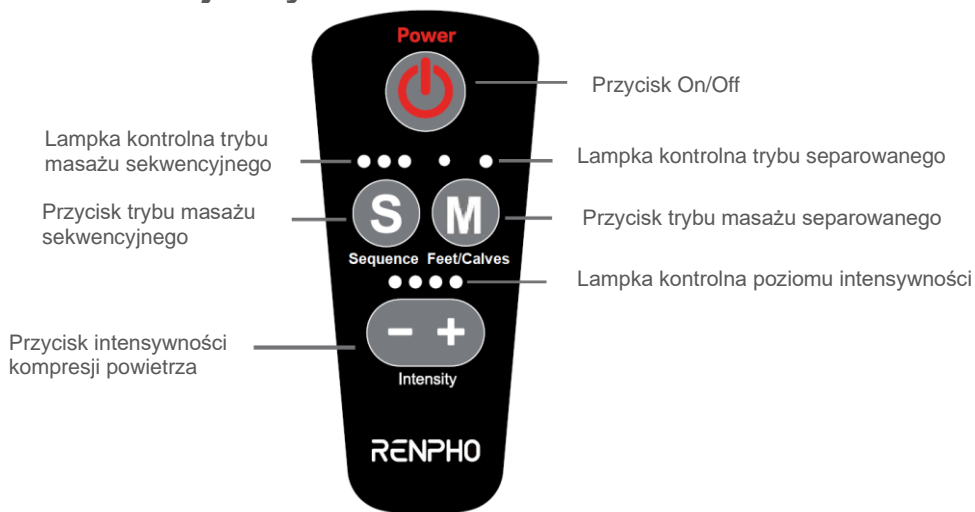

1.  Przycisk On/Off. Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć masażer. Domyślnym trybem jest tryb masażu sekwencyjnego 1 z intensywnością kompresji 2.

2. **S** Tryb masażu sekwencyjnego. Naciśnij, aby wybrać jeden z 3 trybów masażu sekwencyjnego.
 - 1: masaż stóp i łydek
 - 2: masaż od łydek do stóp.
 - 3: masaż od stóp do łydek.

3. **M** Tryb masażu separowanego. Naciśnij, aby wybrać jeden z 2 trybów masażu separowanego.
 - 1: tylko masaż stóp
 - 2: tylko masaż łydek

Wskazówka: Masażer będzie się automatycznie wyłączał co 20 minut. Przed automatycznym wyłączeniem lampka kontrolna odpowiedniego trybu będzie MIGOTAĆ na czerwono. Należy wtedy ponownie nacisnąć przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić masażer. Masażer wyposażony jest w funkcję pamięci po wyłączeniu, dzięki czemu po ponownym włączeniu automatycznie działa w ostatnim ustawionym trybie i intensywności.

4. **- +** Przycisk intensywności kompresji powietrza. Naciśnij, aby zmniejszyć lub zwiększyć intensywność. Istnieją 4 poziomy intensywności dla każdego trybu, domyślny to poziom 2. Zaleca się pozostawienie zapasu na ok. 4 palce lub wybrać najniższą intensywność, jeśli jest ci za ciasno.
5. Możesz wybrać masaż jednej z nóg. Upewnij się, że wszystkie przewody są właściwie podłączone i pasują kolorami. Następnie załóż tylko jedną nogawkę.

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

1. **NIE NALEŻY** używać nieoryginalnych części zamiennych
 - Nieprofesjonalny personel dokonujący napraw nie powinien samodzielnie demontować ani wymieniać części masażera.
 - Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
 - **NIE NALEŻY** używać ani przechowywać urządzenia w miejscu o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze.

- Po użyciu odłącz przewód zasilający
 - **PRZERWAĆ** użytkowanie w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek niepożądanego reakcji
 - **PRZERWAĆ** użytkowanie i odłączyć zasilanie jeśli produkt stanie się zbyt gorący lub zacznie wydzielać nieprzyjemny zapach
 - **NIE NALEŻY** przenosić produktu ciągnąc za przewód zasilający
2. Produkt ten nie powinien być używany przez osoby z zaburzeniami zdolności fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (potencjalnie także przez dzieci).

3. Sposób czyszczenia



Nie należy prac, prac w pralce, zaleca się przetrzeć masażer miękką, wilgotną lub suchą szmatką.

4. Sposób pakowania

Proszę unikać zginania przewodu powietrznego podczas pakowania, bo może to spowodować awarię pompki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Produkt nie działa	Zasilanie nie jest podłączone lub wtyczka jest luźna	Podłącz prawidłowo kabel zasilający (lampa kontrolna będzie czerwona po naciśnięciu przycisku zasilania)
	Przycisk On/Off nie jest włączony lub wyłącznik automatyczny wyłącza urządzenie	Naciśnij przycisk On/Off

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Niektóre elementy nie mogą się napompować	Kolor przewodów nie pasuje do gniazda	Proszę postępować zgodnie z Ważnymi wskazówkami bezpieczeństwa , aby podłączyć przewód powietrzny
	Aktualny tryb masażu wyklucza masowanie tego elementu	Proszę wybrać odpowiedni tryb
	Przewód powietrzny nie został dokładnie zamocowany i występuje nieszczelność	Sprawdź czy przewód powietrzny jest właściwie podłączony (brak szczeliny między wtyczką a nogawką).
	Przewód powietrzny został zagięty	Proszę unikać zaginania przewodu i kontakt z nami: bok@brandbook.services
Jest za ciasno lub odczuwasz dyskomfort	Zbyt ciasne zapięcie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wybierz najniższą kompresje 2. Rozepnij rzepy 3. Naciśnij przycisk On/Off by wyłączyć
	Używasz zbyt duże intensywności kompresji	
Produkt nagle przestał działać	Funkcja ochrony przed przegrzaniem wyłącza masażer automatycznie, gdy jest zbyt gorący	Przed ponownym włączeniem masażera należy odczekać, aż ostygnie
	20 minutowy wyłącznik czasowy wyłącza go	Ponownie naciśnij przycisk On/Off

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kontroler ręczny nagrzewa się	Produkt był używany przez dłuższy czas (wzrost temperatury kontrolera controller >15°C jest normalny)	Zaleca się używać od 20 do 30 minut aby uniknąć nadmiernego zużycia. Po wyłączeniu należy pozostawić masażer do ostygnięcia przed ponownym użyciem
Różnica intensywności kompresji między jedną i drugą nogą	Przewód powietrzny nie został dokładnie lub prawidłowo zamocowany	Proszę się upewnić, że przewód jest właściwie zamocowany
	Nogawki mogą być nierównomiernie zapięte	Proszę pozostawić taki sam zapas zapięcia na każdej z nóg
W przypadku innych problemów, prosimy o kontakt pod: bok@brandbook.services		

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: Kompresyjny masażer nóg Renpho

Wejście: 12V=0.6A

Moc znamionowa: 7.2 W

Zasilanie: 100-240V AC

Autowylącznik: 20 minutes

GWARANCJA

Zakupiony przez Państwa produkt RENPHO objęty jest dwuletnią gwarancją producenta licząc od dnia daty dostawy.

Utrata gwarancji jest możliwa m.in. w następujących okolicznościach

- Niewłaściwa lub nieodpowiednia konserwacja lub modyfikacja
- Wypadek, niewłaściwe użycie, nadużycie, zanieczyszczenie lub inne przyczyny zewnętrzne.
- Użycie nieokreślonego zasilacza i akcesoriów.
- Utrata lub uszkodzenie w transporcie
- Szkody, które powstają w wyniku nieprzestrzegania instrukcji

2. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do części zużywalnych lub eksploatacyjnych i nie obejmuje żadnego produktu, z którego usunięto numer seryjny.

OBSŁUGA KLIENTA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące produktu, zapraszamy do mailowego kontaktu z nami. Nasz zespół obsługi klienta gwarantuje uzyskanie szybkiej odpowiedzi i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów z naszymi produktami.

E-mail: bok@brandbook.services

* W przypadku zgłoszeń wadliwych produktów lub zwrotów, należy się z nami skontaktować podając numer zamówienia oraz datę zakupu. NIE wyrzucaj żadnych elementów produktów, ponieważ mogą one być potrzebne do procesu rozpatrywania reklamacji bądź naprawy.

Dystrybutor w Polsce: **BRANDBOOK SERVICES SP. Z O.O. SP. K.**
ul. Raławicka 99, 02-634 Warszawa
NIP: 6751735834 KRS: 000086023

Producent: **JOICOM CORPORATION**
5984 Archibald Ave. Building 1, Suite 1, Eastvale, CA 92880

Shenzhen Runfeng Digital Technology Co., LTD
Chuanghui Building, Intersection of Banxuegang Boulevard and
Yongxiang Road, Bantian Subdistrict,
Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, China



Instagram



Facebook



Website



Group