


# ANLAN

## Peeling kawitacyjny

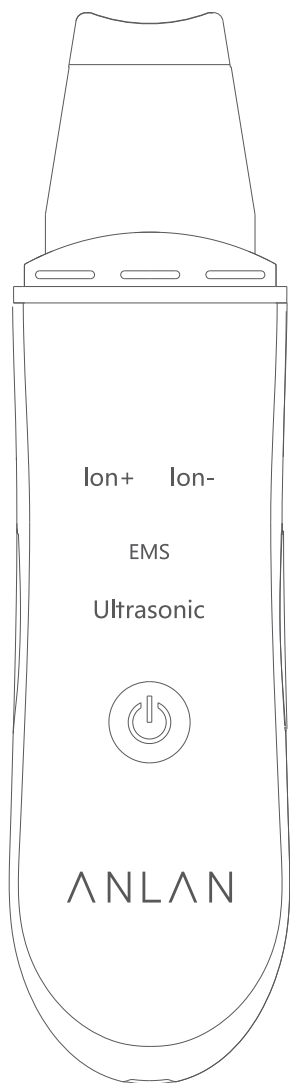


## Instrukcja obsługi

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed pierwszym użyciem.

## Środki ostrożności

1. Przed użyciem usuń makijaż i staraj się utrzymywać skórę wilgotną podczas stosowania.
2. Utrzymuj szpatułkę w czystości przed i po użyciu. Czyść ją wilgotną ściereczką lub płatkami kosmetycznym. Nie myj jej bezpośrednio pod wodą.
3. Nie należy moczyć urządzenia w wodzie ani używać go podczas kąpieli.
4. Nie należy używać urządzenia na tym samym obszarze twarzy i szyi przez dłuższy czas.
5. Nie stosować w okolicach powiek, okolic oczu, gardła, gałki ocznej, ucha, górnej części twarzy oczu, skroni.
6. Nie należy używać sprzętu do celów innych niż opisane.
7. Zaleca się stosowanie urządzenia 1-2 razy dziennie, nie dłużej niż 15 minut za każdym razem. Ta sama część twarzy lub szyi powinna być użyta ponownie po 6 godzinach.
8. Kobiety w ciąży i w okresie menstruacji nie powinny używać sprzętu.
9. Przeciwwskazania użytkowania: choroby serca, wysokie ciśnienie krwi, choroba wieńcowa, aktualne alergie, choroby zakaźne skóry, choroby oparzeniowe skóry, antykoagulanty lub alergie skórne.

# Opis produktu

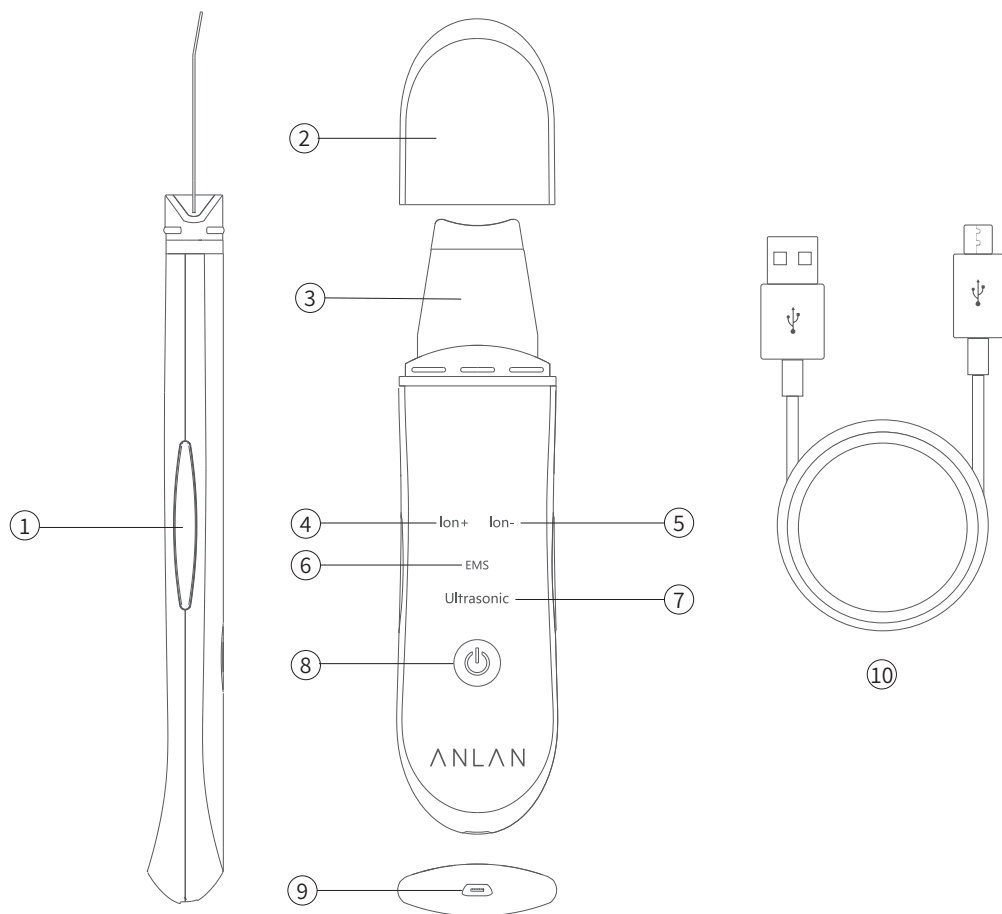

① Pręcik przewodzący jony

② Nakładka ochronna

③ Szpatułka

④ Eksport jonów

⑤ Import jonów

⑥ EMS


⑦ Pielęgnacja ultradźwiękowa

⑧ Przycisk zasilający/trybu pracy

⑨ Wejście ładowania


⑩ Kabel USB

# Specyfikacja


Nazwa produktu	Ultrasonic Skin Scrubber
Model	C-105
Materiał	ABS
Wymiary	43 x 15 x 172mm
Waga	78g
Pojemność baterii	500mAh
Napięcie	5V  1A
Prąd wejściowy	1.5W
Częstotliwość	24KHZ
Czas ładowania	2h
Czas czuwania	ok. 40 min
Automatyczne wyłączenie zasilania	ok. 5 min



1x Peeling  
kawitacyjny

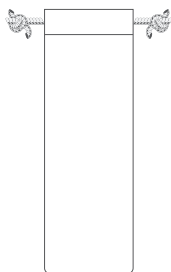

1x Etui

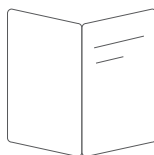


1x Instrukcja




1x Kabel  
ładujący

## Przygotowanie do użycia

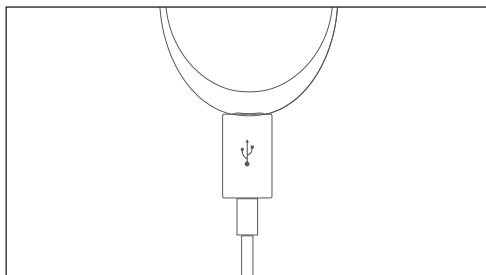

1. Naładuj urządzenie. Wskaźnik led będzie świecił po pełnym naładowaniu.

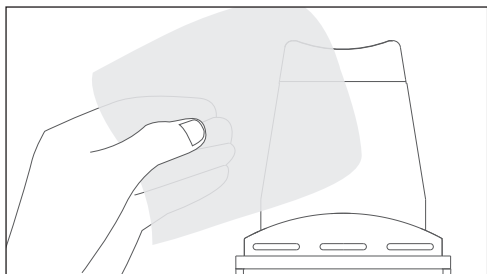


2. Wyczyść szpatułkę wodą lub płatkami kosmetycznymi.

## Instrukcja obsługi

※ Przycisk zasilania: naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć zasilanie. Naciśnij ponownie, aby zmienić każdy tryb. Przytrzymaj przycisk off, aby wyłączyć zasilanie.



### Wibracje ultradźwiękowe

1. Umyj twarz, a następnie przetrzyj wodą lub balsamem.

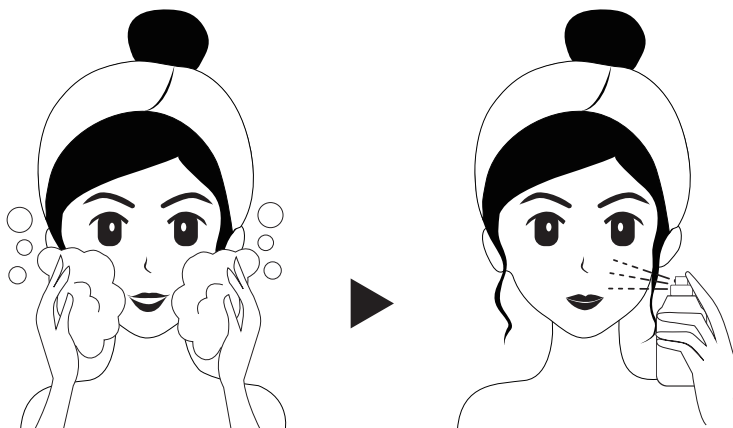

2. Naciśnij przycisk on/off, aby uruchomić urządzenie. Naciśnij ponownie, aby wybrać tryb czyszczenia ultradźwiękowego. Trzymając drążek przewodzący jony, ostrożnie przyłóż szpatułkę do skóry pod kątem około 30-45°C i przesuwaj ją po twarzy w kierunku wskazanym przez strzałkę.

- ※ Pielęgnacja skupiona jest na pozbyciu się zanieczyszczeń oraz zaskórników. Zaleca się dostosowanie zgodnie ze stanem skóry.
- ※ Szpatułka nie może być używana na tej samej części skóry przez długi czas i musi być stale przemieszczana podczas użytkowania.
- ※ Mgiełka wodna wytwarzana przez drgania głowicy szpatułki będzie się różnić, w zależności od natężenia światła w pomieszczeniu.

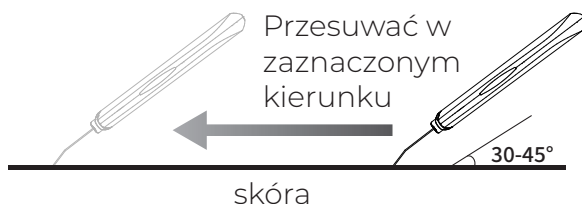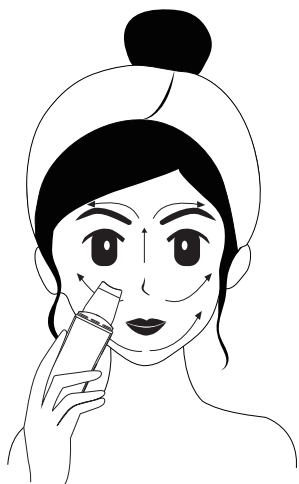


3. Po użyciu umyj twarz i szpatułkę, aby usunąć sebum i olej, a następnie wytrzyj ją ręcznikiem lub ściereczką.

- ※ Części innych niż głowka szpatułki nie można myć wodą.

Ion+: Wibracje ultradźwiękowe + eksport jonów

1. Po umyciu zwilż skórę twarzy wodą lub tonikiem micelarnym.


- ※ Nigdy nie używaj urządzenia na suchej skórze.

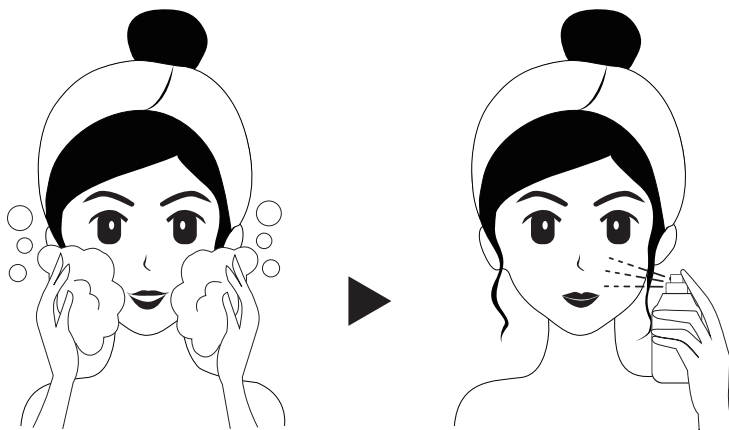

2. Naciśnij przycisk zasilający, aby uruchomić urządzenie. Naciśnij ponownie, aby wybrać tryb jon+. Trzymając pasek przewodzący jony, ostrożnie przyłóż szpatułkę do skóry pod kątem około 30-45°C i przesuwaj ją po twarzy w kierunku wskazanym przez strzałkę.

※Pielęgnacja skupiona jest na pozbyciu się zanieczyszczeń oraz zaskórników. Zaleca się dostosowanie zgodnie ze stanem skóry.

※Szpatułka nie może być używana na tej samej części skóry przez długi czas i musi być stale przemieszczana podczas użytkowania.

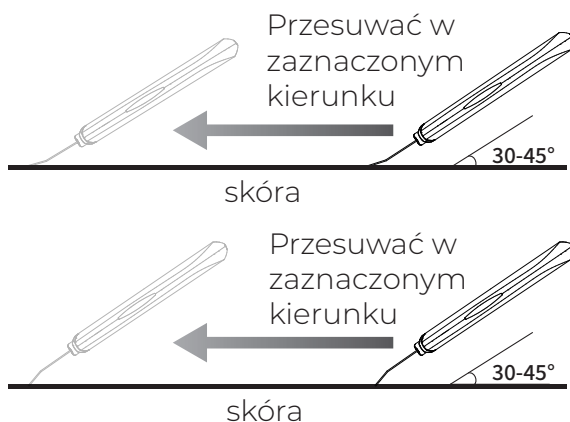


3. Po użyciu umyj twarz i szpatułkę, aby usunąć sebum i olej, a następnie wytrzyj ją ręcznikiem lub ściereczką.

※Mgiełka wodna wytwarzana przez drgania głowicy szpatułki różni się, w zależności od natężenia światła w pomieszczeniu.

## Ion+: Wibracje ultradźwiękowe + import jonów


1. Po demakijażu i umyciu twarzy, nałóż na skórę maseczkę lub krem nawilżający.

※ Po zastosowaniu trybu ION - ułatwi to wchłanianie składników pielęgnacyjnych.

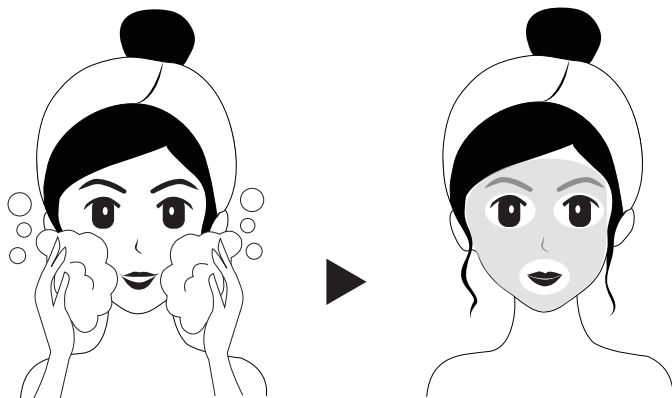

2. Naciśnij przycisk zasilający, aby uruchomić urządzenie. Naciśnij ponownie, aby wybrać tryb ION. Trzymając pręt przewodzący jony, ostrożnie przyłóż szpatułkę do skóry pod kątem około 20-30° i przesuwaj ją po twarzy w kierunku wskazanym przez strzałkę.

※ Szpatułka nie może być używana na tej samej części skóry przez długi czas i musi być stale przemieszczana podczas użytkowania.

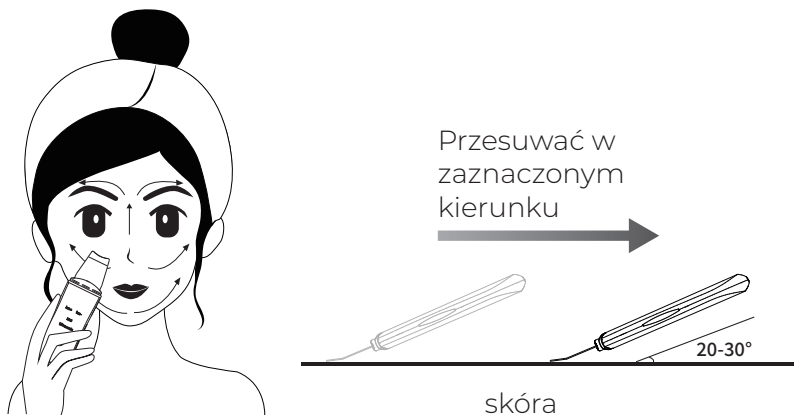

3. Użyj kremu do odżywiania skóry. Przetrzyj pozostałości kremu na główicy urządzenia papierowym ręcznikiem.


※ Części innych niż główka szpatułki nie można myć wodą.



# EMS:EMS Lifting - Wibracje ultradźwiękowe + Ion Import + EMS


1. Po oczyszczeniu w trybie eksportowym, zwilż skórę twarzy kremem przeciwzmarszczkowym lub lotionem.

※Nigdy nie używaj urządzenia na suchej skórze.

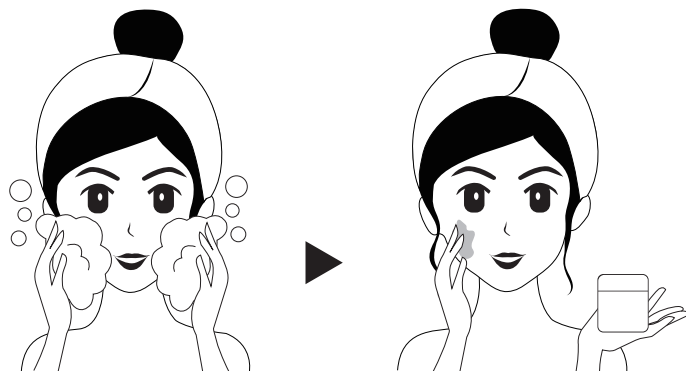

2. Naciśnij przycisk zasilający, aby uruchomić urządzenie. Ponownie naciśnąć przycisk i wybrać tryb EMS. Trzymając pręt przewodzący jony czystego prądu, ostrożnie przyłóż szpatułkę do skóry pod kątem około 20-30° i przesuwaj ją po twarzy w kierunku wskazanym przez strzałkę.

※Szpatułka nie może być używana na tej samej części skóry przez długi czas i musi być stale przemieszczana podczas użytkowania.

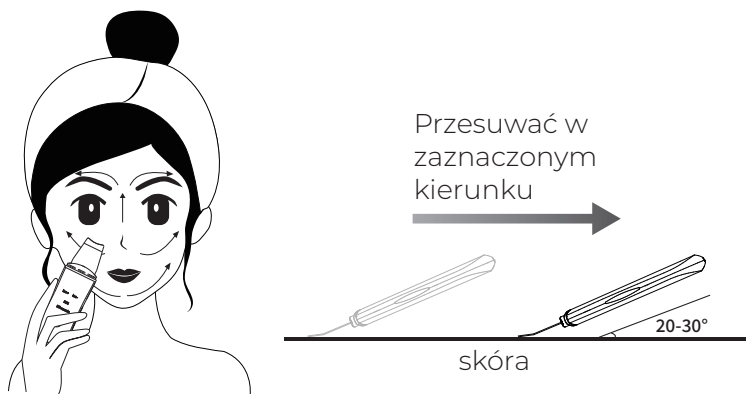


3. Użyj serum do odżywiania skóry. Przetrzyj pozostałości kremu na głowicy urządzenia papierowym ręcznikiem.


※Części innych niż głowka szpatułki nie można myć wodą.

## Uwagi podczas użytkowania


- ▶ Postępuj zgodnie z instrukcją i przesuвай urządzenie zgodnie z wyznaczonym kierunkiem.

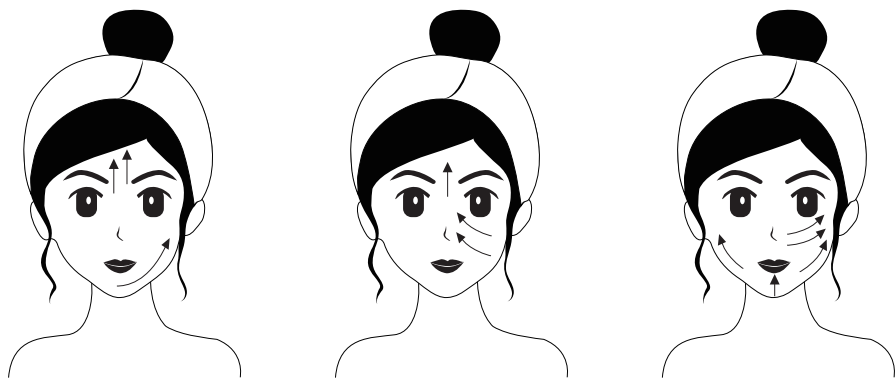

- ▶ Zwracać uwagę na kierunek ruchu podczas użytkowania.

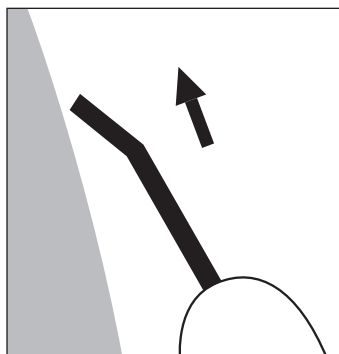

Pic.1 Tryb ultradźwiękowy

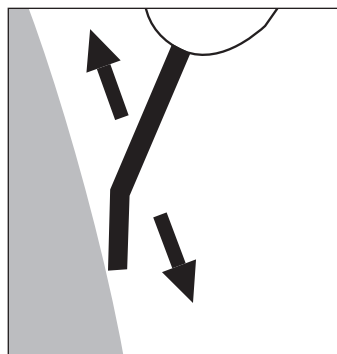

Pic.2 Tryb Ion+/Ion-, EMS

## Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie działa po naciśnięciu przycisku zasilającego/trybu pracy:

- Brak energii baterii. Uruchom ponownie po pełnym naładowaniu.
- Nie działa. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu naprawy lub wymiany.


## Urządzenie nie ładuje się:

- Kabel ładujący nie jest dobrze podłączony lub kabel ładujący jest uszkodzony. Sprawdź połączenie ładowania lub użyj innego kabla.
- Jeśli nadal nie działa, skontaktuj się z obsługą klienta w celu naprawy lub wymiany.


Przycisk zasilający/trybu pracy wyda komunikat dźwiękowy trzy razy:

- Niski poziom baterii. Uruchom ponownie po pełnym naładowaniu.
- Jeśli nadal wydaje komunikat dźwiękowy, skontaktuj się z obsługą klienta w celu naprawy lub wymiany.


## Czyszczenie urządzenia

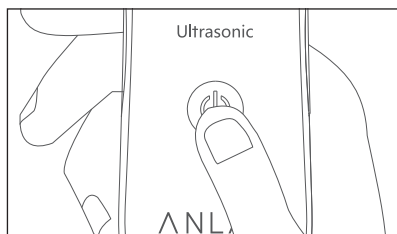

1. Po użyciu, przytrzymaj przycisk zasilający/trybu pracy przez 3-5 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

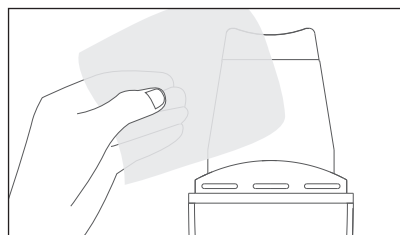

2. Wytrzyj płyn lub inne pozostałości na urządzeniu.

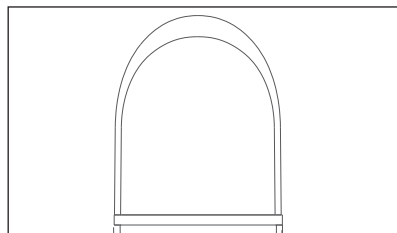

3. Wyczyść szpatułkę wodą lub płatkami kosmetycznymi, a po wyschnięciu zakryj nasadkę ochronną.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.

Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.