



D1

Szczoteczka Soniczna

Numer modelu: 551

Dziękujemy za zakup Fairywill 551. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość.

1. Cechy urządzenia

Wodoodporność i antypoślizgowa powierzchnia.

Wymienna główka.

Wysoka częstotliwość wibracji – 38,000 drgań na minutę. Usuwa osad i dokładnie czyści zęby.

Ładowanie USB + diody informujące o stanie ładowania.

Dioda przypominająca o niskim poziomie mocy. Czerwona dioda będzie migać 10 razy po wyłączeniu szczoteczki, by przypomnieć o konieczności ładowania.

Ochrona przed przeładowaniem – szczoteczka przerywa zasilanie po naładowaniu się do pełna.


Ochrona przed głębokim rozładowaniem. Gdy akumulator zostanie rozładowany do bardzo niskiego poziomu mocy, urządzenie przejdzie w stan niskiej mocy – silnik i diody zostaną dezaktywowane.

Inteligentny timer co 30 sekund będzie przypominał podczas mycia o przesunięciu szczoteczki na inny obszar.

4 tryby pracy: wybielanie, czuły, polerowanie oraz masaż.

Szczoteczka zawsze się włącza w ostatnio uruchamianym trybie.

2. Budowa urządzenia

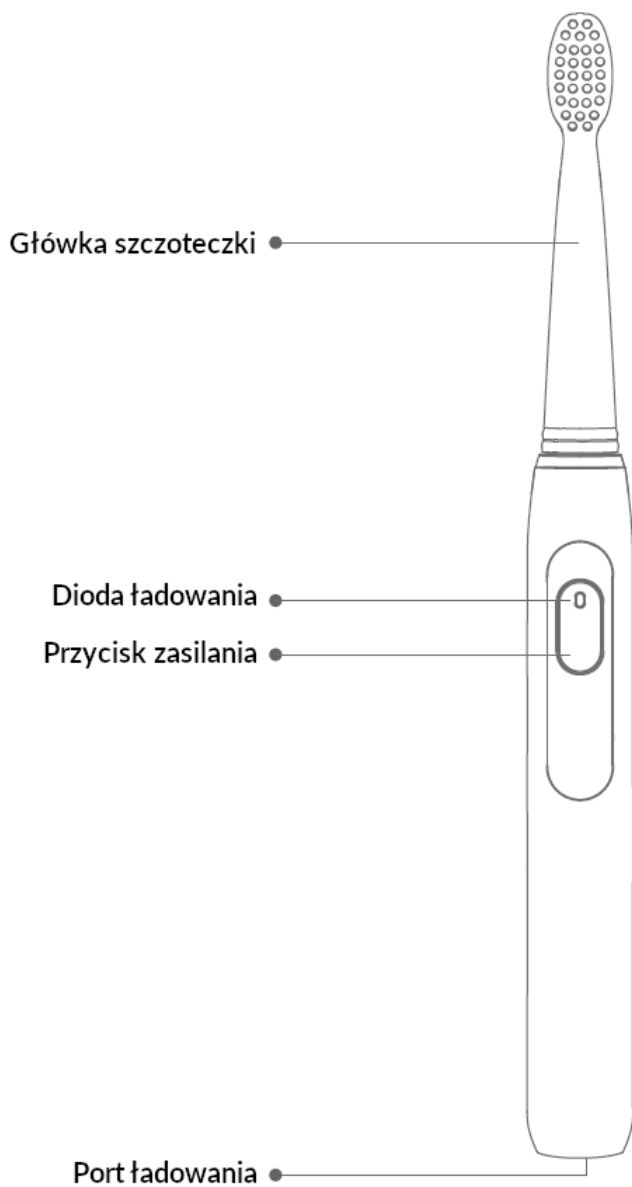

3. Obsługa


☆ Używanie szczoteczki

- Podłącz główkę szczotki i upewnij się że jest stabilnie zamontowana. Przekręć ją na zamkniętą pozycję.
- Włącz szczoteczkę naciskając przycisk zasilania.
- Wybierz odpowiedni tryb pracy naciskając przycisk zasilania z 3 sekundowymi przerwami. Przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć szczoteczkę.
- Nawilż włosie i nałóż pastę do zębów.
- Przyłóż włosie szczoteczki do zębów pod małym kątem skierowanym do dziąseł.
- Delikatnie poruszaj szczoteczką po zębach z przodu i tyłu. Szczoteczka powinna poruszać się po zębach z minimalnym naciskiem. Nie należy zbyt mocno naciskać na zęby lub dziąsła i nie należy trzymać szczoteczki w jednym miejscu przez zbyt długi czas.
- Szczotka ma 2-minutowy inteligentny timer i co 30 sekund przypomina o konieczności mycia innego obszaru.
- Przejdź do kolejnej sekcji szczęki, gdy odczujesz pauzę. Szczoteczka wyłączy się po 2 minutach.
- Aby zapobiec rozpryskiwaniu się pasty, włączaj szczoteczkę tylko gdy przyłożysz ją już do zębów.

☆ Wymiana główki szczoteczki


- Montaż: Załóż główkę na uchwyt. Obróć w kierunku wskazówek zegara, tak by A pasował do T.
- Demontaż: Obróć główkę szczotki w kierunku przeciwnym do wskazówek, tak by A pasował do B. Pociągnij za uchwyt.

Montaż

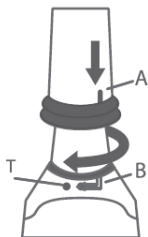

Założ szczotkę i obróć w kierunku wskazówek zegara, by A pasował do B

Demontaż

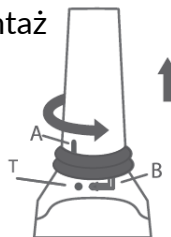

Obróć główkę szczoteczki w kierunku przeciwnym do wskazówek, aż A dopasuje się do B i następnie pociągnij w górę

☆ Ładowanie szczoteczki

- Gdy poziom mocy akumulatora jest niski, dioda zaświeci się 10 razy. Należy wtedy naładować szczoteczkę.
- Dioda ładowania będzie się świecić na czerwono podczas ładowania. Gdy akumulator jest naładowany do pełna, dioda zmieni kolor na zielony automatycznie.
- Gdy urządzenie jest włączane pierwszy raz lub było rozładowane przez długi czas, może się zdarzyć że diody nie będą się zapalać przez pierwsze 5 minut.

☆ Opis funkcji

Pierwszy tryb: Wybielanie

W tym trybie, szczoteczka wibruje z częstotliwością 38,000 drgań na minutę. Ciemno-niebieska dioda się zaświeci, szczotka znacznie się porusza i intensywność wibracji jest najwyższa. Tryb ten jest przeznaczony dla użytkowników, którzy mają spore wymagania co do czyszczenia i nie posiadają czułych zębów. Urządzenie będzie przypominać co 30 sekund by zmienić obszar mycia.

Drugi tryb: Czuły

W tym trybie, niebieska dioda jest zapalona, szczotka porusza się niewiele i intensywność wibracji jest najniższa. Tryb ten jest przeznaczony dla użytkowników z czułymi zębami. Urządzenie będzie przypominać co 30 sekund by zmienić obszar mycia.

Trzeci tryb: Polerowanie

W tym trybie, zielona dioda jest zapalona, włosie się porusza i intensywność drgań szybko się zmienia. Tryb ten może być używany dodatkowo, aby polepszyć efekt wybielania zębów. Urządzenie będzie przypominać co 30 sekund by zmienić obszar mycia.

Trzeci tryb: Masaż

W tym trybie, dioda miga ciemno-niebieskim kolorem i intensywność drgań zmienia się powoli, by stymulować dziąsła. Urządzenie będzie przypominać co 30 sekund by zmienić obszar mycia.

4. Parametry

Temperatura robocza: 0-50°C

Napięcie robocze: DC1.2V

Materiał włosia: Nylon

Napięcie robocze: DC5.0V

Moc wejściowa: 0.6W

Wodoodporność: IPX7

5. Ostrzeżenia

- Nie należy rozkręcać, naprawiać lub modyfikować urządzenia bez autoryzacji producenta.
- Osoby z chorobami dziąseł, zębów lub po chirurgii w okolicach ust powinni skonsultować się z doktorem przed użyciem szczoteczki.
- Dzieci mogą korzystać ze szczotki tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy zanurzać produktu w wodzie przez zbyt długi czas.
- Nie należy zostawiać szczoteczki w miejscu gdzie panuje zbyt wysoka temperatura ani bezpośrednio na słońcu.
- Nie należy dociskać włosia do zębów ani dziąsła.