

# RENPHO

## Instrukcja obsługi

### INTELIŻENTNA WAGA ŁAZIENKOWA

Dla modeli : ES-CS20M, ES-32MD, ES-26M



#### Dystrybutor w Polsce:

BRANDBOOK SERVICES SP. Z O.O. SP. K.

ul. Raclawicka 99, 02-634 Warszawa

NIP: 6751735834 KRS: 000086023

INSTRUKCJA OBSŁUGI  
↓

# RENPHO

## **Uwaga!**

Podczas użytkowania wagi należy przestrzegać środków ostrożności.

1. Waga nie powinna być używana do diagnozowania lub leczenia jakichkolwiek stanów chorobowych. Przed podjęciem diety lub programu ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
2. Wszystkim osobom, które mogą być w ciąży, cierpią na osteoporozę, mają wszczepiony rozrusznik serca, protezy stawów, przenośne EKG lub inne metalowe urządzenia, odradza się korzystanie z tego produktu. W takim przypadku prosimy o używanie wyłącznie podstawowej funkcji pomiaru wagi i noszenie obuwia w celu unikania prądu elektrycznego podczas wchodzenia na wagę.
3. Wszystkie dane dotyczące szczegółowego składu ciała mają charakter poglądowy i nie powinny być traktowane jako

substytut porady wykwalifikowanego personelu medycznego.


4. Jeśli waga działa nieprawidłowo, najpierw sprawdź zasilanie bateryjne. W razie potrzeby wymień zużyte baterie.
5. Sprawdź urządzenie przed każdym użyciem. Nie należy używać urządzenia, jeśli uległo uszkodzeniu. Używanie uszkodzonego urządzenia może spowodować obrażenia lub niedokładne wyniki.
6. Zadbaj o to aby waga zawsze pozostawała sucha. Zachowaj ostrożność podczas używaniu wagi z mokrą, śliską powierzchnią.
7. Waga jest delikatna, proszę obchodzić się z nią ostrożnie.
8. Ta waga jest urządzeniem pomiarowym o wysokiej precyzji. Nigdy nie należy po niej skakać, tupać ani demontować jakichkolwiek części. Obchodź się z nią ostrożnie, aby uniknąć stłuczenia.

9. Waga nie jest wodoodporna; nigdy nie zanurzaj wagi w wodzie. Do czyszczenia powierzchni używaj wilgotnej ściereczki lub środka do czyszczenia szkła. Nie należy używać mydła ani innych chemicznych środków czyszczących.
10. Zawsze używaj wagi na stabilnej, płaskiej powierzchni i upewnij się że waga podczas ważenia pozostaje w całkowitym bezruchu.
11. Nie kładź ciężkich przedmiotów na wadze, gdy nie jest używana.
12. Ta waga została zaprojektowana do użytku domowego i nie jest przeznaczona do celów medycznych czy komercyjnych.
13. Aby zapobiec zakłóceniom lub niebezpieczeństwu, nie należy używać wagi w pobliżu o silnego pola elektromagnetycznego.
14. Nie należy podejmować prób demontażu wagi z jakiegokolwiek powodu.

## Krok 1

Przed użyciem:

Zainstaluj prawidłowo baterie AAA;  
jeden zestaw znajduje się w opakowaniu.


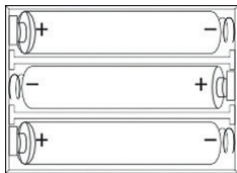


### Ważne:

1. Włóż baterie AAA zgodnie z symbolami biegunów (+ i -) oznaczonymi wewnątrz.
2. Dostarczone oryginalne baterie NIE NADAJĄ się do ponownego ładowania. NIE WOLNO próbować ładowania baterii.
3. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis „LO”, należy wymienić baterie

## Krok 2

Używaj wagi na płaskim i stabilnym podłożu.  
Unikaj dywanów i nierównych podłóg.

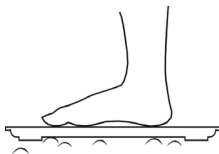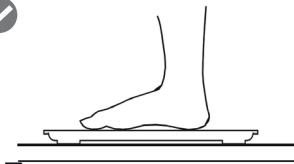

### Krok 3

Pobierz i zainstaluj na swoim smartfonie bezpłatną aplikację „Renpho Health”.



Ważne: Ze względu na ciągłe aktualizacje i ulepszenia, aplikacja „Renpho Health” może wyglądać nieco inaczej.

### Krok 4

Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji i parowania:

- a. Zarejestruj swoje konto w aplikacji Renpho Health używając e-mail. Możesz również skorzystać z trybu Guest (Gość), jeśli nie chcesz się rejestrować.
- b. Włącz funkcje Bluetooth na swoim smartfonie. W przypadku urządzenia z systemem iOS 13 lub nowszym, wymagane jest dodatkowe pozwolenie na korzystanie przez aplikację z funkcji Bluetooth:
  1. Przejdź do ustawień na swoim telefonie;
  2. Przewiń w dół, aby znaleźć aplikację Renpho Health;
  3. Pozwól na korzystanie przez aplikację z funkcji Bluetooth. Dla użytkowników systemu Android, upewnij się, że usługi lokalizacji są włączone dla urządzeń z Android 6.0 lub nowszym.

## Krok 5

Parowanie wagi RENPHO z aplikacją.

### Sposób 1




- a. Stań na powierzchni wagi bosymi i suchymi stopami. Poczekaj, aż zapali się ekran.



- b. Stuknij „Pair”, aby sparować wagę z aplikacją.

### Sposób 2

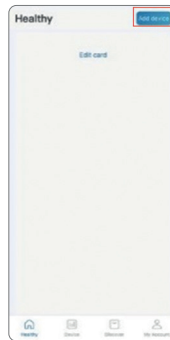


- a. Stuknij „Add device” w prawym górnym rogu strony Health.




b. Stuknij „Pair”,  
aby sparować  
wagę z aplikacją.



c. Stań na powierzchni  
wagi bosymi  
i suchymi stopami.

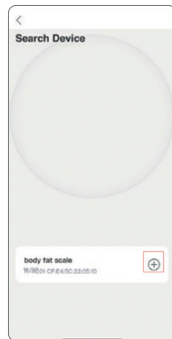

d. Po wyświetleniu się  
nazwy urządzenia,  
dotknij „+”, aby je dodać.

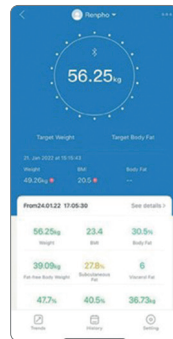

e. Stój na wadze przez  
5-10 sekund. Parowanie  
jest prawidłowe,  
gdy Twój pomiar  
pojawi się w aplikacji  
Renpho Health.

## Ważne!

Rekalibracja:


Jeśli waga została przeniesiona lub odwrócona do góry nogami, należy ją ponownie skalibrować, a by zachować dokładność pomiarów:

1. Proszę umieścić wagę na twardym, płaskim i stabilnym podłożu. Unikaj wszelkich dywanów.
2. Postaw jedną stopę na wadze, aby ją wybudzić.
3. Gdy na monitorze pojawią się cyfry, zdejmij stopę z powierzchni.
4. Waga powinna wyświetlić „CAL”, a następnie „0,0” lub „0,00”.

CAL → 00

OR

CAL → 000

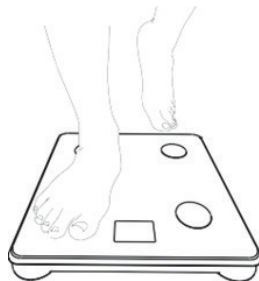

Aby uzyskać więcej informacji, proszę zeskanować kod QR lub skorzystać z naszej strony internetowej ze szczegółową instrukcją.



## Najczęściej Zadawane Pytania

### 1. Dlaczego waga nie wykrywa poziomu tkanki tłuszczowej i/lub innych danych?

Upewnij się, że Twoje stopy są suche i gołe. Stań stabilnie na wadze z rozstawionymi stopami, twarzą do cyfrowego wyświetlacza LED.

Poczekaj około 15 sekund na zakończenie procesu ważenia.

Jeśli nie, spróbuj nałożyć oraz rozprowadzić równomiernie na stopy niewielką ilość kremu nawilżającego

i zważ się ponownie.

Poproś inną osobę o wejście na wagę i zobacz, czy dane dotyczące tkanki tłuszczowej wyświetlają się w jej przypadku.

### 2. Zarejestrowałem konto na stronie RENPHO, dlaczego nie mogę zalogować się do Aplikacji?

Ponieważ strona internetowa RENPHO i aplikacja Renpho Health to dwa odrębne systemy, należy utworzyć konto dla aplikacji. Jeżeli połączenie z Bluetooth nie powiodło się, proszę spróbować poniższych kroków:

1. Resetowanie wagi.  
Wymij jedną baterie na ok. 5 sekund i włóż ją z powrotem.
2. Zresetuj połączenie Bluetooth.  
Upewnij się, że Bluetooth i GPS (tylko Android) są włączone w telefonie.
  - a. Otwórz aplikację "Renpho Health".
  - b. Stań jedną stopą na powierzchnię wagi, aby ją wybudzić.
  - c. Po kilku sekundach wczytywania, na ekranie smartfona pojawi się numer modelu wagi, stuknij go.
  - d. Stań ponownie na wadze, aby zakończyć parowanie.

## WARUNKI GWARANCJI

Zakupiony przez Państwa produkt RENPHO objęty jest dwuletnią ograniczoną gwarancją producenta liczoną od daty dostawy. Warunki gwarancji znajdują się na stronie:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

**Uwaga:** Rejestracja produktu nie jest wymagana do uzyskania gwarancji. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie rejestrować produktu, nie spowoduje to ograniczenia gwarancji na produkt.



To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec ewentualnym, szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, podaj go odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z punktu zwrotu i odbioru odpadów elektronicznych lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

## OBSŁUGA KLIENTA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące produktu, nie wahaj się skontaktować z nami bezpośrednio pod adresem:

✉ Email: [bok@brandbook.services](mailto:bok@brandbook.services)

\*W przypadku zgłoszeń wadliwych produktów lub zwrotów należy skontaktować się z nami podając numer zamówienia oraz datę zakupu. NIE wyrzucaj żadnych elementów produktów, ponieważ mogą one być potrzebne do procesu rozpatrywania reklamacji bądź naprawy.

# RENPHO

**Dystrybutor w Polsce:**

BRANDBOOK SERVICES SP. Z O.O. SP. K.

ul. Raclawicka 99, 02-634 Warszawa

NIP: 6751735834 KRS: 000086023

