




Instrukcja obsługi

InFace Depilator IPL

(ZH-01D)

Przed użyciem produktu należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i zachować do przyszłego użytku w bezpiecznym miejscu.

1. Przedstawienie produktu

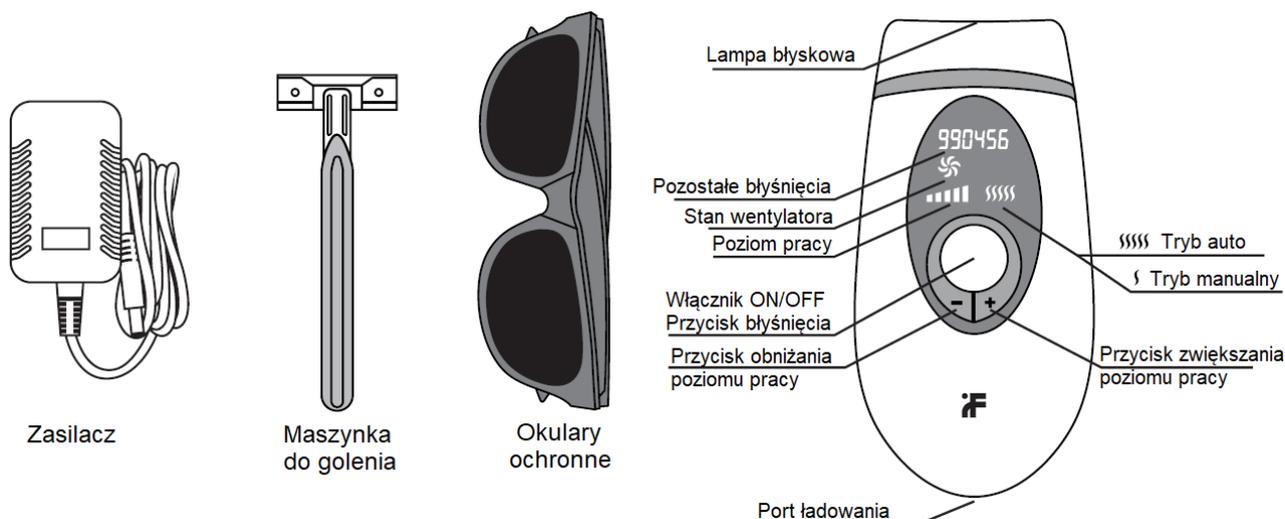

2. Środki ostrożności

- Depilacja IPL jest nie drażniąca, bezpieczna i wygodna.
- Do tego produktu należy używać zasilacza fabrycznego i prawidłowo podłączyć wtyczkę zasilacza do gniazdzka domowego, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie używaj tego produktu w środowisku o wysokiej temperaturze i wysokiej temperaturze środowiska.
- Jeśli produkt jest zdeformowany lub uszkodzony, nie używaj go ponownie, aby uniknąć wypadków.
- Nie stosować na skórę po oparzeniach słonecznych, kosmetycznych zabiegach na skórze lub rannych miejscach.
- Nie używaj tego produktu, jeśli występują ciemne plamy, takie jak piegi, znamiona, pieprzyki, tatuaże i obszary makijażu permanentnego.
- Nie używaj tego produktu podczas ciąży i laktacji.
- Nie należy używać tego produktu, gdy użytkownik jest wyposażony w aktywne implanty tj. regulator rytmu serca, stymulator elektrody nerwowej i pompa insulinowa.
- Nie używaj tego produktu u osób, które miały radioterapię lub chemioterapię w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
- Nie należy używać tego produktu u osób z cukrzycą, zastoinową chorobą serca, lekką alergią, padaczką, historią chorób immunosupresyjnych (w tym zakażeniem HIV lub AIDS).
- Produkt nie jest zalecany dla osób z alergią, chorobami skóry, zapaleniem skóry, alergią skóry, urazem skóry, wypryskiem, obrzękiem itp.
- Ten produkt nie działa z ciemną skórą.
- Jeśli w przeszłości występowały u użytkownika tworzenie radonu, znana światłoczułość lub leki zwiększające wrażliwość skóry, w tym niefarmakologiczne środki przeciwzapalne (np. Aspiryna, ibuprofen, acetaminofen), tetracyklina, fenotiofen, tiofen, leki moczopędne, sulfonilomoczniki, leki sulfonamidowe, trimetoprim, fluorouracyl, winblastyna, gryzeofulwina, AHA, kwas retinowy, Accutane lub miejscowy retinoid A itd. Nie używaj ich.

- Nie stosować, jeśli użytkownik obecnie przyjmuje AHA, kwas beta, kwas retinowy, ma pryszcze (kwas izoretinowy), miejscowe retinoidy lub kwas azelainowy.
- Nie należy stosować leków przeciwtrądzikowych (izoretinoiny) w ciągu ostatnich 6 miesięcy oraz metody leczenia Hmong w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
- Jeśli kiedykolwiek miałeś opryszczkę, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu.
- Nie używaj tego produktu do brodawek, tatuaży i makijażu permanentnego.
- Przed użyciem osusz ręce, aby zapobiec przedostaniu się wody lub innego płynu do urządzenia, a tym samym jego uszkodzeniu.
- Zapoznaj się z tabelą natężenia światła, aby określić odpowiednią intensywność światła. Jeśli poczujesz ból lub nieprawidłowości na skórze lub ciele, natychmiast przestań go używać.
- Proszę odciąć zasilanie w celu czyszczenia i konserwacji.
- Ten produkt nie nadaje się dla dzieci, należy przechowywać ten produkt poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj tego produktu w pobliżu łatwopalnych przedmiotów i cieczy (alkohol, benzyna, zmywacz do paznokci, spray itp.).
- Nie używaj tego produktu w środowisku z wodą, aby uniknąć niebezpieczeństwa (w pobliżu wanny, prysznic, umywalki itp.).
- Nie jedz wrażliwych na światło potraw podczas użytkowania (tj. szpinak, rzepak, musztarda itp.) Podczas pracy surowo zabrania się zakrywania wlotu powietrza i otworów wentylacyjnych.
- Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać tego produktu. W sprawach związanych z konserwacją skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.
- Proszę używać okulary ochronne w trakcie użytkowania, a po wykonanym zabiegu odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną.

3. Zawartość opakowania

- Depilator IPL x1
- Zasilacz x1
- Maszynka do golenia x1
- Okulary ochronne x1
- Instrukcja obsługi x1

4. Wskazówki użytkowania

Przy pierwszym użyciu tego produktu należy przeprowadzić test skóry dla każdej części i odczekać 24 godziny przed depilacją IPL.

UWAGA !

Jeśli zauważysz jakiegokolwiek zmiany koloru skóry od ostatniego użycia np. opalenie, ponownie wykonaj test skóry.

Aby uzyskać najlepsze efekty, podczas testu skóry spróbuj wybrać najwyższą intensywność, która nie będzie powodować dyskomfortu na skórze. Nie patrz bezpośrednio w port światła ani nie błyskaj w kierunku oka podczas pracy. Proszę nosić okulary ochronne. Jeśli soczewka filtra portu światła jest zabrudzona, nie rozpylaj alkoholu bezpośrednio na port światła.

5. Przygotowanie do depilacji

- W przypadku części wymagających depilacji użyj maszynki do golenia, aby usunąć włosy. (Poniżej 1mm)
Uwaga! Nie używaj kremu do golenia zamiast golenia maszynką.
- Oczyść skórę, aby upewnić się, że powierzchnia skóry jest wolna od włosów, całkowicie sucha i pozbawiona tłustych substancji (nie ma pozostałości po zapachowej mgiełce, balsamie, perfumach, kremach do opalania).
- Sprawdź, czy urządzenie i port światła są czyste oraz czy pozostały włosy, kurz i włókna oraz inne zanieczyszczenia. Jeśli tak, wytrzyj go ostrożnie przed włączeniem.

- Zapoznaj się z zalecaną poniżej tabelą natężenia światła, dostosuj natężenie światła do koloru skóry i włosów i utrzymuj się w komfortowym stanie.

Kolor włosów \ Kolor skóry	Biały/Szary	Czerwony	Beżowy	Jasny blond	Brązowy	Ciemny brąz	Czarny
Biały	⊗	⊗	⊗	4/5	4/5	4/5	4/5
Beżowy	⊗	⊗	⊗	4/5	4/5	4/5	4/5
Jasny brąz	⊗	⊗	⊗	4/5	4/5	4/5	4/5
Brązowy	⊗	⊗	⊗	1/2/3	1/2/3	1/2/3	1/2/3
Ciemny brąz	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Czarny	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

UWAGA !

Jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort, zmniejsz natężenie światła.

W powyższej tabeli zalecane natężenie światła oznaczono (1-5), natomiast „X” oznacza, że ten produkt nie jest odpowiedni do użycia dla takiej osoby.

- Zalecane miejsca do depilacji: nogi, pachy, okolice bikini, ramiona, czoło itp.



UWAGA !

Mężczyźni: nie używaj tego produktu na twarzy z brodą, męskich narządach płciowych, wokół oczu, w pobliżu brwi, nozdrzy, uszu lub odybytu.

Kobiety: nie używaj tego produktu na sutki i otocze sutka, odbycie, wargach sromowych i pochwie.

6. Użytkowanie produktu

1. Podłącz zasilacz do urządzenia i gniazdka sieciowego, a następnie wciśnij dłużej przycisk ON/OFF.

2. Naciśnij krótko klawisze „+” i „-”, aby wyregulować ustawienie natężenia światła; Wybierz odpowiedni poziom zgodnie z własną sytuacją. Im wyższy poziom, tym lepszy efekt. Nowicjuszom sugeruje się rozpoczęcie od najniższego poziomu.


3. Podczas użytkowania używaj okularów ochronnych dołączonych do zestawu.

4. Umieść produkt prostopadle do skóry, wciśnij klawisz i zacznij depilację.

5. Domyślnym trybem uruchamiania tego produktu jest tryb ręczny. Naciśnij

długo przycisk „+” lub „-”, aby przejść do trybu automatycznego (w trybie automatycznym ten produkt może stałe świecić i depilować podczas kontaktu ze skórą, w odstępach 2-3 sekund dla każdego oświetlenia) i przejść do depilacji.

6. Po wykonaniu depilacji wyłącz urządzenie dłuższym przytrzymaniem przycisku ON/OFF, następnie wyjmij zasilacz z gniazdka sieciowego.

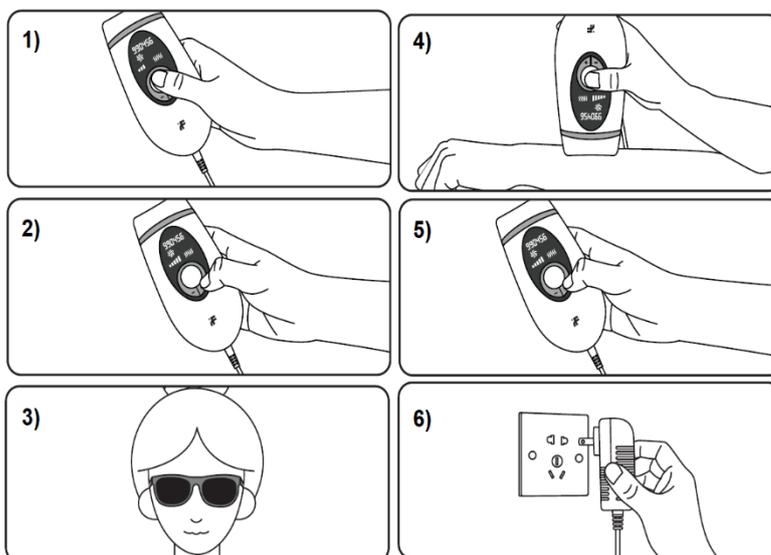

7. Konserwacja i pielęgnacja po użyciu

Jeśli podczas użytkowania wystąpią problemy, zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby sprawdzić nieprawidłowości.

- Nie można używać kosmetyków drażniących lub na bazie alkoholu po depilacji.
- Nie podrażniać skóry w strefie usuwania włosów gorącą wodą o temperaturze powyżej 50 °C po użyciu.
- Nie ćwicz energicznie po depilacji, aby zapobiec poceniu się podczas ćwiczeń i podrażnieniu skóry w miejscu usuwania włosów.
- Proszę zwrócić uwagę na ochronę przed słońcem po depilacji, nie wystawiać bezpośrednio miejsca depilacji na słońce.
- Zaleca się unikanie wody w ciągu 6 godzin po depilacji. Produkty nawilżające / żel z aloesu można stosować do nawilżania napromieniowanego obszaru.
- Czas naprawy oparzenia słonecznego nie jest krótszy niż 1 tydzień. Surowo zabrania się opalania napromieniowanego obszaru w ciągu 48 godzin od wykonania depilacji. Nawet jeśli opalenie jest wymagane po 48 godzinach, zawsze należy zwracać uwagę na wszelkie niezdrowe warunki i zmiany na skórze. Użyj kremu przeciwsłonecznego po 72 godzinach. (Przerywane lub pośrednie nasłonecznienie nie należy do opalenizny)
- Nie używaj sztucznego opalania słonecznego podczas zabiegów depilacji tym urządzeniem.
- Jeśli potrzebujesz operacji plastycznej po oświetleniu (tylko obszar naświetlania), skonsultuj się z lekarzem.
- Jeśli po goleniu i naświetlaniu skóra na krótko stanie się sucha i swędząca. Zapewniamy, że ta reakcja nie jest szkodliwa dla organizmu i jest naturalna, powrót do normalności nie powinien trwać długo, można takie miejsca nawilżać łagodnym środkiem nawilżającym.

8. Najczęściej zadawane pytania

Jeśli podczas użytkowania zostaną wykryte problemy, zapoznaj się z informacjami poniżej, aby sprawdzić nieprawidłowości. Jeśli problemów dalej nie można rozwiązać, skontaktuj się z serwisem technicznym lub sprzedawcą

1. **Czy mężczyźni mogą z niego korzystać?** - Ten produkt może być używany zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety.
2. **Wrażenie ciepła w części użytkowej** - ten produkt przyjmuje technologię światła pulsacyjnego, a część użytkowa ma uczucie ciepła, co jest normalnym zjawiskiem. Jeśli źle się poczujesz, możesz obniżyć poziom i wybrać wygodny dla siebie do użytkowania.
3. **Czy produkt działa drażniąco na skórę?** - W tym produkcie zastosowano technologię pulsacyjnego światła, która bezpośrednio uderza melaninę u podstawy mieszków włosowych bez stymulacji. W tym produkcie zastosowano zintegrowany filtr optyczny, aby zapewnić bezpieczeństwo skóry.
4. **Jak często można go używać?** - Włosy w miejscu depilacji są zwykle na różnych etapach cyklu wzrostu włosów. Aby skutecznie działać na wszystkie włosy, proces naświetlania należy powtarzać raz w tygodniu przez pierwsze dwa miesiące.
5. **Czy trzeba wymieniać lampę naświetlającą?** - Ten produkt nie wymaga wymiany lamp, lampa tego produktu ma żywotność ponad 900 000 razy i może utrzymać efekt oświetlenia przez ponad 5 lat (dane uzyskane na podstawie średniego zużycia przez jednego użytkownika i zalecanej metody oświetlenia), co pozwala zaoszczędzić koszty kupowanie drogich lamp zapasowych.

9. Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: Depilator IPL

Model: ZH-01D

Napięcie znamionowe: 12V

Moc wejściowa: 36W

Temperatura przechowywania: 0°C - 40°C

Temperatura pracy: 5°C - 35°C

Wilgotność pracy: 30%-85%

10. Warunki gwarancji

Następujące okoliczności nie są objęte gwarancją:

- Starzenie się i ścieranie produktów spowodowane normalnym użytkowaniem.
- Problemy z produktem spowodowane z winy użytkownika, niewłaściwą obsługą lub nieprofesjonalną konserwacją i użyciem akcesoriów innych niż firmowe oraz uszkodzenia mechaniczne.
- Materiały eksploatacyjne, akcesoria i inne materiały eksploatacyjne.
- Uszkodzenia spowodowane przez czynniki siły wyższej (takie jak uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, powódź itp.)

11. Utylizacja sprzętu



Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne(WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.