



SZCZOTECZKA DO TWARZY FM300

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do pielęgnacji skóry twarzy. Produkt łą-

czy ze sobą funkcje takie jak: jony dodatnie i ujemne, mikroprądy EMS, ogrzewanie, mikrowibracje oraz fototerapię.

4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
5. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie należy narażać produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.

6. Nie należy ładować urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych

możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać

czyszczenia i konserwacji sprzętu.

8. Po każdym naładowaniu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od sieci.
9. Urządzenia nie należy umieszczać w wilgotnym miejscu tj. łazienki, aby uniknąć zwarcia.
10. Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędzia-

mi. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.

11. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
12. Ładowanie baterii należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

13. Urządzenie nie ma zasilacza sieciowego w zestawie. Należy ładować urządzenie zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi w sekcji ŁADOWANIE URZĄDZENIA.
14. Przewód dołączony do zestawu nie jest przeznaczony do transmisji danych, wyłącznie do ładowania urządzenia.
15. Nie należy demontować urządzenia samodzielnie.

16. Nie należy używać urządzenia w przypadku chorób skóry.
17. Nie należy używać, gdy była wykonana podskórna implantacja metalu lub chirurgia plastyczna twarzy.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **BeautyMe**,
Götze & Jensen

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE



Model:	FM300
Napięcie:	100-240V ~ 50/60Hz
Moc:	4W
Bateria:	Polimerowo litowo-jonowa 3.7V \equiv 650mAh
Wejście:	5.0V \equiv 1.0A
Port:	USB
Tryby pracy:	4
Klasa wodoszczelności:	IPX7
Timer:	4 min
Akcesoria:	Przewód, pierścień
Czas ładowania:	Do 3 godzin
Całkowity czas pracy urządzenia:	Do 300 minut

OPIS URZĄDZENIA





INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Rozpakuj urządzenie i usuń wszelkie zabezpieczenia i naklejki, następnie upewnij się, że urządzenie oraz przewód zasilający nie są uszkodzone.
2. Przed rozpoczęciem korzystania ze szczoteczki opłucz ją pod bieżącą wodą.

3. Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.
4. Naciskając kolejno przycisk  zmienisz tryb pracy. Aby zmienić częstotliwość naświetlania bądź wibrację, naciśnij +/- w urządzeniu.
5. Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj 3 sekundy przycisk  lub poczekaj do samoczynnego wyłączenia urządzenia po 4 minutach.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Wykonaj demakijaż oczu.
2. Nałóż produkt czyszczący na szczoteczkę.
3. Zwilż skórę twarzy wodą.
4. Włącz szczoteczkę.
5. Przesuwaj szczoteczkę po twarzy, kolistymi ruchami. Ruch należy wykonywać od wewnętrznej strony do zewnętrznej.

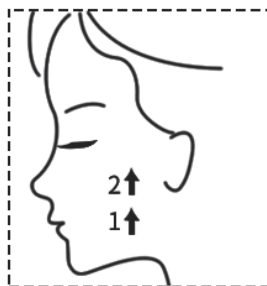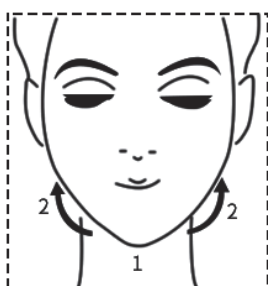

UWAGA! NIE STOSUJ GLINKI JAKO ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO, KTÓRY MOŻE ROZPUŚCIĆ SILIKON.


6. Po zakończeniu czyszczenia szczoteczka wyłączy się.
7. Możesz uruchomić urządzenie ponownie lub użyć kremu.

TRYBY PRACY


Tryb pierwszy - (światło niebieskie + mikroprąd EMS dodatni + mikrowibracje + ogrzewanie)

Światło niebieskie reguluje produkcję sebum i regeneruje skórę.

1. Włóż bawełniany wacik na metalową powierzchnię urządzenia i nałóż pierścień.

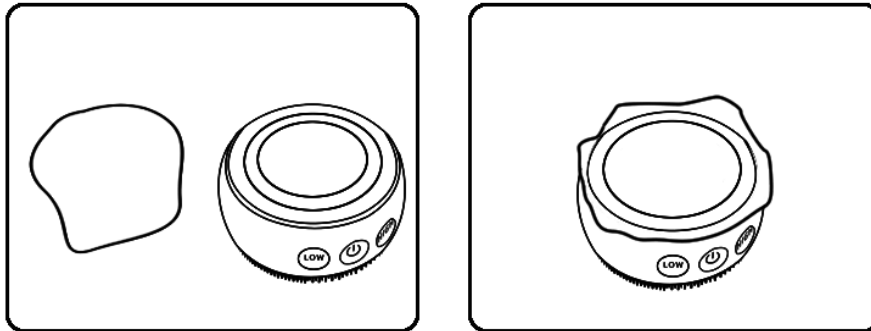


2. Nasącz wacik mleczkiem bądź płynem micelarnym.

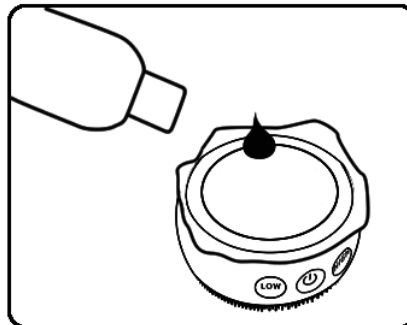

UWAGA ! ŚREDNICA WACIKA POWINNA BYĆ WIĘKSZA NIŻ 5CM.

3. Włącz urządzenie oraz dostosuj ustawienia za pomocą +/-.

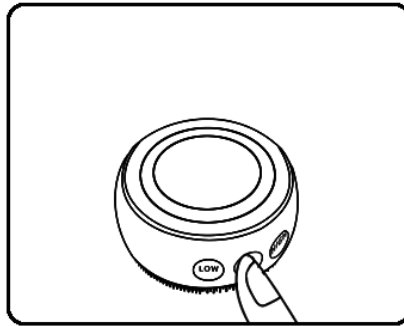

UWAGA! UŻYWAJ URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE Z WODĄ LUB TONIKIEM CZYSZCZĄCYM.

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA Z PŁYNEM DO DEMAKIAŻU ANI OLEJKIEM CZYSZCZĄCYM.


Tryb drugi - (światło zielone + mikrowibracje)

Światło zielone niweluje zaskórniki i trądzik oraz działa rozjaśniająco na skórę.

1. Namocz skórę i nałóż piankę.



2. Włącz urządzenie.

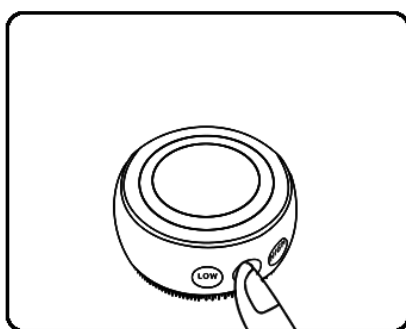

3. Użyj silikonowego włosia do oczyszczenia skóry twarzy.
Za pomocą +/- dostosuj siłę wibracji.




Tryb trzeci - (światło czerwone - mikroprąd EMS ujemny + nieregularne mikrowibracje)

Światło czerwone pobudza produkcję kolagenu i poprawia elastyczność skóry.

1. Nałóż serum na twarz.



2. Włącz urządzenie.

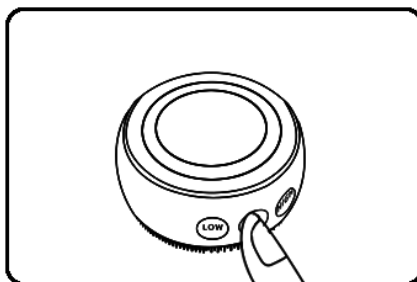

3. Dostosuj ustawienia naświetlania za pomocą +/-.




Tryb czwarty - (światło fioletowe + fototerapia + ogrzewanie)

Światło fioletowe poprawia krążenie i regeneruje skórę.

1. Zwilż skórę.

2. Włącz urządzenie.

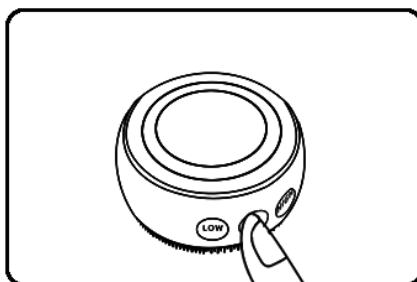

3. Dostosuj ustawienia naświetlania za pomocą +/-.



4. Masuj od dołu do góry, aby uzyskać efekt liftingu.

FUNKCJE URZĄDZENIA

1. **Dodatnia i ujemna jonizacja** - Dodatnie jony przyciągają do siebie związki toksyczne, przez co pory zostają dokładnie oczyszczone, również z chemicznych zanieczyszczeń. Ujemne jony pozwalają wprowadzić kosmetyk w głębsze warstwy skóry niż to jest możliwe przy manualnym wsmarowywaniu.
2. **EMS (mikroprądy)** - Stymulują mięśnie twarzy oraz przywracają ich elastyczność. Stymulacja ta wpływa pozytywnie na produkcję ATP (biologiczna energia niezbędna do funkcjonowania wszystkich komórek), która jest kluczową substancją w produkcji kolagenu.
3. **Ogrzewanie** - Jest to ciepło przenikające do skóry, które zwiększa absorpcję substancji aktywnych oraz poprawia jej elastyczność.

- 4. Mikrowibracje** – Sprawiają, że skóra staje się napięta i bardziej elastyczna, zwiększa również metabolizm komórkowy.
- 5. Fototerapia** – Szczoteczka posiada 4 tryby światła, każdy z nich dedykowany jest innemu problemowi skórnemu.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Urządzenie można ładować na dwa sposoby poprzez port USB w komputerze oraz zasilacz sieciowy.

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Upewnij się, że urządzenie jest suche przed ładowaniem.
3. Podłącz urządzenie poprzez przewód USB do dowolnego portu USB w komputerze.
4. Podłącz urządzenie poprzez przewód USB do zasilacza. Następnie podłącz urządzenie do gniazda zasilania.
5. Podczas ładowania urządzenia podświetlenie świeci się na różowo.
6. Po naładowaniu podświetlenie świeci się w sposób ciągły w kolorze zielonym.
7. Ładuj urządzenie wyłącznie gdy bateria ma niski poziom. Wydłuży to jej żywotność.

UWAGA ! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO

ŻYWOTNOŚĆ, NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

1. Wyłącz urządzenie.
2. Wyczyść szczoteczkę oraz jej silikonowe włosie pod bieżącą wodą z dodatkiem płynu.
3. Następnie przetrzyj do sucha.

UWAGA! DO CZYSZCZENIA NIE UŻYWAJ SZORSTKICH MATERIAŁÓW ORAZ OSTRYCH DETERGENTÓW.

4. Metalową część oraz obręcz wycieraj wyłącznie ręcznikiem papierowym.
5. Przechowuj szczoteczkę w bezpiecznym i suchym miejscu z daleka od promieni słonecznych.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	Bateria w urządzeniu jest rozładowana.	Naładuj urządzenie.
Urządzenie samoczynnie wyłączyło się.	Urządzenie ma wbudowany timer, przez co wyłącza się automatycznie po 4 minutach bezczynności.	Włącz ponownie urządzenie, aby korzystać z niego dalej.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych

- kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA:

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.



Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.