


Bańka chińska elektroniczna Humanas BB01



Instrukcja obsługi Język polski

Informacje o produkcie

Elektroniczna bańka chińska Humanas BB01 to innowacyjne urządzenie do masażu i zabiegów leczniczych, które łączy w sobie osiągnięcia starożytnej chińskiej medycyny oraz świat nowych technologii. Terapia próżniowa oferuje wiele korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Masaż z wykorzystaniem urządzenia łagodzi bóle i napięcia, usuwa toksyny z organizmu, poprawia elastyczność skóry, wzmacnia odporność, przyspiesza metabolizm i stymuluje układ limfatyczny oraz krążenie krwi. Bańka Humanas BB01 posiada 12-stopniową regulację mocy oraz temperatury (maks. 50°C). Gorący masaż będzie nieocenionym wsparciem w walce z dolegliwościami. To doskonały wybór dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie, samopoczucie i wygląd, w wygodny i bezpieczny sposób.

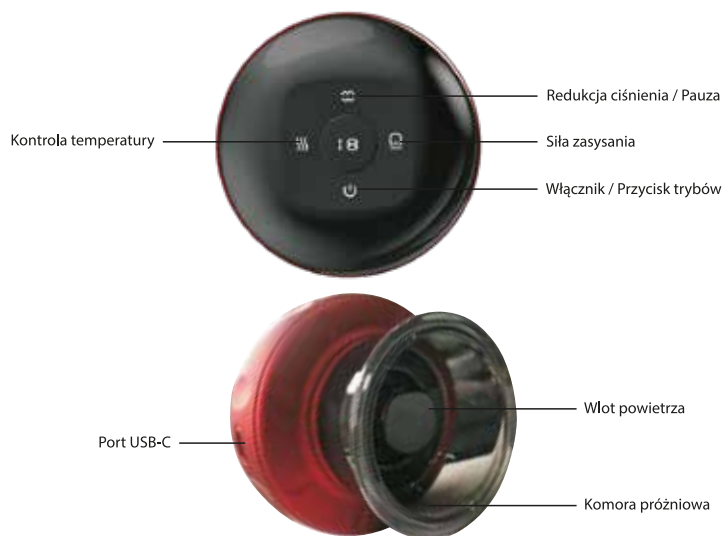

Specyfikacja techniczna

Model	Humanas BB01
Kod produktu	DS-A23
Wymiary	90 x 90 x 78 mm
Prąd ładowania	5 V / 2 A
Siła ssania	- 60 ~0 kPa
Moc	5 W
Norma wykonawcza	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

Użytkowanie

Przygotowanie przed użyciem

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się ze środkami ostrożności. Jeśli warunki użytkowania nie są spełnione nie należy korzystać z urządzenia.
- Zaleca się oczyszczenie i nawilżenie skóry mokrym ręcznikiem lub sprayem, aby poprawić komfort użytkowania.
- Sprawdź, czy komora próżniowa jest dobrze przykręcona do urządzenia (wyczyść ją przed i po użytkowaniu za pomocą mokrego ręcznika)
- Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź stan techniczny urządzenia.

Włączanie / zmiana trybów

- Naciśnij i przytrzymaj włącznik przez 1,5 sekundy, aby uruchomić urządzenie. Na ekranie urządzenia wyświetlony zostanie 20 minutowy minutnik oraz wskaźnik temperatury. Po 20 minutach od uruchomienia urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Naciśnij i przytrzymaj włącznik przez 1,5 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
- Kiedy urządzenie jest uruchomione naciśnij włącznik, aby zmienić tryb pracy. Urządzenie posiada dwa tryby pracy: ciągły oraz pulsacyjny.
- Tryb ciągły z włączonym ogrzewaniem jest trybem domyślnym urządzenia.

Moc zasysania

- Domyślnie moc zasysania urządzenia ustawiona jest na wartość 3.
- Naciśnij przycisk siły zasysania, aby dostosować moc do swoich potrzeb. Urządzenie oferuje 12 poziomów siły zasysania.
- Jedno naciśnięcie przycisku siły zasysania zwiększa moc zasysania o 1 poziom. Aktualna moc zasysania wyświetlana jest na wyświetlaczu urządzenia.
- Po osiągnięciu 12 poziomu siły zasysania kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje przejście na poziom 0.
- Zaleca się rozpoczęcie masażu na poziomie 1, kiedy skóra nie jest przyzwyczajona do tego typu masażu.

Kontrola temperatury


- Domyślnie temperatura podgrzewania ustawiona jest na wartość 3. Naciśnij przycisk kontroli temperatury, aby dostosować temperaturę do swoich potrzeb. Urządzenie oferuje 12 poziomów grzania oraz poziom 0 z wyłączoną funkcją podgrzewania.
- Gdy temperatura podgrzewania ustawiona zostanie na 9-ty lub wyższy poziom wskaźniki temperatury zaczną migać różnymi kolorami. Im wyższa temperatura, tym szybsze miganie wskaźników.
- Gdy temperatura osiągnie najwyższy poziom, naciśnij przycisk, aby wyłączyć funkcję ogrzewania (bieg 0) - wskaźnik temperatury zgaśnie.

Redukcja ciśnienia / pauza

Podczas masażu naciśnij przycisk redukcji ciśnienia, aby zwolnić próżnię i móc swobodnie usunąć urządzenie z masowanego miejsca. Po naciśnięciu przycisku redukcji ciśnienia urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

Uwaga 1: W przypadku wykorzystywania podczas masażu płynów takich jak olejki eteryczne olejek należy równomiernie rozprowadzić na skórze, nie pozostawiając żadnych większych skupisk olejku. Urządzenie należy stosować w odpowiedniej pozycji – komorę próżniową skierowaną ku dółowi.

Uwaga 2: Urządzenie wyposażone zostało w filtr zapewniający ochronę urządzenia przed pyłem oraz kroplami olejków. Podczas czyszczenia komory próżniowej sprawdzaj stan filtra, czyści go regularnie lub wymieniaj w razie potrzeby.

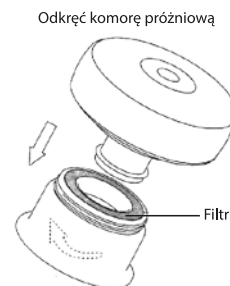

Po wymianie filtra lub wyczyszczeniu komory próżniowej przykręć z powrotem.

Instrukcje ładowania

- Podłącz kabel zasilający do portu USB-C urządzenia. Drugi koniec kabla podłącz do portu USB ładowarki, aby rozpocząć ładowanie.
Wymagany prąd zasilania: 5 V / 2 A.
- Podczas ładowania port ładowania powinien być suchy i czysty. Czas ładowania może się nieznacznie różnić w zależności od warunków otoczenia. Urządzenie nie powinno być podłączone do ładowania dłużej niż 8 h.
- Podczas ładowania biały wskaźnik miga i gaśnie po pełnym naładowaniu.
- Produkt nie może być używany w trakcie ładowania.

Środki ostrożności

NIEBEZPIECZEŃSTWO (zawartość związana z poważnymi obrażeniami ciała spowodowanymi nieprawidłową obsługą)
Nie używać jednocześnie z następującym sprzętem elektronicznym. Jednoczesne użytkowanie może spowodować błędy lub uszkodzenie instrumentów medycznych i poważnie zagrozić życiu!

- Implanty medyczne takie jak rozrusznik serca.
- Podtrzymujące życie medyczne urządzenia elektroniczne, takie jak sztuczne serce lub sztuczne płuco.
- Elektrokardiograf i inne elektroniczne instrumenty pomiarowe.
- Inne rodzaje implantów medycznych.

Aby uniknąć dyskomfortu lub obrażeń ciała z urządzenia nie powinni korzystać pacjenci w następujących okolicznościach:

- Ciążę, trwającą miesiączką, uszkodzenia naskórka, żyłaki lub lekoterapia.
- Choroby zakaźne, choroby i nadwrażliwość skóry, stan pooperacyjny, wysoka gorączka lub stan krytyczny.
- Nowotwory złośliwe, miejscowe uszkodzenia lub owrzodzenia, urazowe złamania, ostre ropne zapalenia, utrata elastyczności skóry.
- Nieprawidłowe ciśnienie sercowe, wewnątrzczaszkowe lub ciśnienie krwi.
- Ciężka neurotyczność, drgawki, skurcze i łęki maniakalne.
- Choroby ze skłonnością do krwawień, takie jak małopłytkowość, białaczka, hemofilia, płamica Henocha-Schonleina i inne.
- W pobliżu serca, okolic twarzy, części intymnych lub dużych naczyń krwionośnych na powierzchni ciała.
- Z zaburzeniami percepcji skóry lub nieprawidłową skórą.
- W trakcie trwania leczenia lub złego samopoczucia.
- Nadmierne zmęczenie, niewyspanie, pod wpływem alkoholu i zbyt późne zasypianie (2 godziny przed i po posiłku są również zabronione).
- Uczulenie na metal lub czerwone światło.
- Dzieci, niezdolnych do swobodnego wyrażania swoich życzeń lub niezdolnych do kontaktu z innymi osobami.

W razie wątpliwości co do zastosowania urządzenia w wybranej jednostce chorobowej zapoznaj się z opinią lekarza prowadzącego lub specjalisty.

Uwagi (zawartość związana z poważnymi obrażeniami ciała spowodowanymi nieprawidłową obsługą)

- Produkt należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi.
- Podczas korzystania z produktu przezroczysta komora próżniowa powinna ściśle przylegać do skóry i równomiernie się z nią stykać. Podczas korzystania z urządzenia należy unikać kontaktu z ranami i bliznami.
- Element grzewczy urządzenia może powodować oparzenia niskotemperaturowe skóry przy długotrwałym użytkowaniu w jednym miejscu. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy sposób użytkowania urządzenia.
- W przypadku złego samopoczucia w trakcie lub po użyciu urządzenia, należy natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Zaleca się, aby z urządzenia korzystał jeden użytkownik. W przypadku korzystania z urządzenia przez kilku użytkowników należy wyłączyć i wyczyścić przezroczystą komorę próżniową przed użyciem przez kolejną osobę.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli komora próżniowa została uszkodzona.
- Po użyciu tego produktu na skórze mogą pojawić się zaczerwienienia lub wybroczyny, co jest zjawiskiem normalnym. Zwykle zaczynają ustępować naturalnie w ciągu 2 dni (w zależności od poszczególnych typów skóry).
- Podczas długiego użytkowania temperatura produktu może wzrosnąć, co jest normalnym zjawiskiem.
- W przypadku nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie i wyłączyć urządzenie.
- Nie używaj produktu podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj kabla USB-C do ładowania mokrymi rękami, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Ten produkt posiada wbudowany akumulator litowy. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia, znanurzać go w wodzie ani wrzucać do ognia, aby zapobiec uszkodzeniu i eksplozji produktu.
- Po użyciu urządzenia naczynia krwionośne na powierzchni skóry w miejscu masażu rozszerzą się. Należy odpocząć przez 45 minut przed kąpielą.

Czyszczenie i konserwacja

Należy przestrzegać zalecanych metod czyszczenia i konserwacji, aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Wytrzyj urządzenie suchą ściereczką z mikrofibry. Nie używaj detergentów, alkoholu, rozcieńczonek, benzyny.
- Po każdym użyciu należy wyłączyć urządzenie i wyczyścić jego komorę próżniową mokrym ręcznikiem.
- Produkt należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu.
- Nie należy pozostawiać pozostałości wody na produkcie.
- Do czyszczenia nie należy używać szcetek z twardym włosiem, ani metalowych zmywaków, aby nie uszkodzić powierzchni urządzenia.
- Nie należy używać wody ani innych płynów do bezpośredniego płukania.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go regularnie ładować, aby zapewnić odpowiedni stan techniczny akumulatora.

Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w następujących miejscach:

- Miejsca narażone na wibracje i uderzenia.
- Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgoci.
- Miejsca narażone na oddziaływanie silnego pola elektromagnetycznego.
- W pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
- W zasięgu dzieci lub zwierząt.

Częste problemy i ich rozwiązania

Problem	Przyczyna problemu i jego rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby uruchomić urządzenie. 2. Naładuj urządzenie i spróbuj ponownie.
Nie można naładować urządzenia	1. Wymień zasilacz lub sprawdź inne gniazdko sieciowe. 2. Sprawdź, porty zasilania ładowarki oraz urządzenia nie są zabrudzone lub zanieczyszczone. Jeśli tak, należy je wyczyścić. 3. Wymień zasilacz lub kabel ładujący.
Słabe zasysanie	1. Zdejmij komorę próżniową i dokręć ją ponownie. 2. Sprawdź, czy otwory wlotu i wylotu powietrza nie są zablokowane. 3. Sprawdź, czy filtr nie wymaga wymiany.
Zbyt niska temperatura nagrzewania	1. Sprawdź, czy funkcja podgrzewania jest włączona i czy wskaźnik temperatury jest włączony. 2. Ze względu na wpływ temperatury otoczenia należy zwiększyć poziom podgrzewania. 3. Akumulator jest rozładowany, należy go naładować.

Przypomnienie

1. Podczas korzystania z urządzenia po raz pierwszy, należy zwrócić uwagę na stopniowe zwiększanie poziomów, aby znaleźć odpowiedni tryb i intensywność.
2. W trakcie masażu, jeżeli próżnia będzie zbyt silna należy nacisnąć przycisk redukcji ciśnienia, aby przerwać pracę lub zmniejszyć ciśnienie i uniknąć dyskomfortu skóry.